



Instrucciones de uso

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



**LIEBHERR**

# Contenido

<b>1</b>	<b>Indicaciones generales de seguridad.....</b>	6.3	Mensajes.....	35	
<b>2</b>	<b>Visión general del aparato.....</b>	6.3.1	Advertencias.....	35	
2.1	Volumen de suministro.....	6.3.2	Recordatorios.....	37	
2.2	Vista general del electrodoméstico y del equipamiento.....	<b>3</b>	<b>Equipamiento.....</b>	<b>37</b>	
2.3	Equipamiento especial.....	4	7.1	Cierre de seguridad.....	37
2.4	Ámbito de uso del electrodoméstico.....	4	7.2	Sensores.....	37
2.5	Emisión de ruido del aparato.....	4	7.3	Interfaces.....	38
2.6	Conformidad.....	<b>5</b>	<b>Mantenimiento.....</b>	<b>38</b>	
<b>3</b>	<b>Funcionamiento de la pantalla Touch.....</b>	5	8.1	Plan de mantenimiento.....	38
3.1	Navegación y explicación de los símbolos.....	5	8.2	Descongelación del electrodoméstico.....	40
3.2	Menús.....	5	8.3	Limpiar el aparato.....	40
3.3	Modo de reposo.....	<b>5</b>	<b>Asistencia al cliente.....</b>	<b>41</b>	
<b>4</b>	<b>Puesta en marcha.....</b>	6	9.1	Datos técnicos.....	41
4.1	Condiciones de instalación.....	6	9.2	Avería técnica.....	42
4.2	Dimensiones del electrodoméstico.....	7	9.3	Servicio al cliente.....	42
4.3	Transporte del electrodoméstico.....	7	9.4	Placa de características.....	43
4.4	Desembalaje del electrodoméstico.....	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>Puesta fuera de servicio.....</b>	<b>43</b>
4.5	Retirada de la protección para el transporte.....	8	<b>11</b>	<b>Eliminación.....</b>	<b>43</b>
4.6	Montaje del tirador de la puerta.....	8	11.1	Preparar el aparato para su eliminación.....	43
4.7	Montaje del seguro antivuelco.....	8	11.2	Eliminar el aparato de manera respetuosa con el medioambiente.....	43
4.8	Instalación del electrodoméstico.....	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>Información adicional.....</b>	<b>43</b>
4.9	Alineación del electrodoméstico.....	9	<b>13</b>	<b>Guía rápida para el uso diario.....</b>	<b>45</b>
4.10	Instalación de varios electrodomésticos.....	10			
4.11	Tras la instalación.....	10		El fabricante trabaja continuamente para seguir desarrollando todos los tipos y modelos. Por lo tanto, rogamos su comprensión por posibles modificaciones en la forma, el equipamiento y la técnica.	
4.12	Eliminación del embalaje.....	10			
4.13	Cambio de las bisagras de la puerta.....	10			
4.14	Alineación de la puerta.....	10			
4.15	Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico.....	10			
4.16	Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio).....	10			
<b>5</b>	<b>Conservación.....</b>	18	<b>Icono</b>	<b>Explicación</b>	
5.1	Notas sobre la conservación.....	19		<b>Leer las instrucciones</b>	
<b>6</b>	<b>Uso.....</b>	19		Para conocer todas las prestaciones de su nuevo aparato, lea detenidamente las notas de estas instrucciones.	
6.1	Controles y elementos de indicación.....	20		<b>Más información en Internet.</b>	
6.1.1	Indicación de estado.....	20		Podrá encontrar las instrucciones en formato digital con información adicional y en otros idiomas en Internet a través del código QR en la portada de las instrucciones o introduciendo el número de servicio en <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .	
6.1.2	Símbolos de indicación.....	20		Encontrará el número de servicio en la placa de características:	
6.1.3	Señales acústicas.....	21			
6.2	Funciones del electrodoméstico.....	21			
6.2.1	Indicaciones sobre las funciones del electrodoméstico.....	21			
6.2.2	Encendido y apagado del electrodoméstico .....	21			
6.2.3	Temperatura .....	21			
6.2.4	Registro de temperatura .....	22			
6.2.5	Iluminación * .....	22			
6.2.6	Protección de acceso al menú de ajuste .....	22			
6.2.7	Códigos de acceso.....	23			
6.2.8	Recordatorio de intervalo de mantenimiento ....	25			
6.2.9	Idioma .....	25			
6.2.10	Unidad de temperatura .....	25			
6.2.11	Brillo de pantalla .....	25			
6.2.12	Alarm Sound.....	26			
6.2.13	Key Sound.....	26		<b>Comprobar el aparato</b>	
6.2.14	Conexión WiFi .....	26		Compruebe que ninguna pieza presente daños de transporte. En caso de reclamaciones, debe dirigirse al distribuidor o al servicio técnico.	
6.2.15	Conexión LAN .....	27		<b>Variaciones</b>	
6.2.16	Información sobre el electrodoméstico .....	28		Las instrucciones son válidas para varios modelos; pueden producirse variaciones. Las secciones solo aplicables a determinados aparatos aparecen marcadas con un asterisco (*).	
6.2.17	Horas de funcionamiento .....	28			
6.2.18	Software .....	29			
6.2.19	Descongelación .....	29			
6.2.20	Calibración del sensor .....	30			
6.2.21	Alarma de temperatura .....	30			
6.2.22	Alarma de puerta .....	31			
6.2.23	Alarma de luz * .....	32			
6.2.24	Simulación de alarma .....	33			
6.2.25	Transmisión de alarma .....	33			
6.2.26	Modo de demostración .....	34			
6.2.27	Restablecer a los valores de fábrica .....	34			

\* según modelo y dotación

Icono	Explicación
	<b>Instrucciones de manejo y resultados de manejo</b> Las instrucciones de manejo aparecen marcadas con ►, mientras que los resultados de manejo se indican con ▷.
	<b>Vídeos</b> En el canal de YouTube de Liebherr-Hausgeräte hay disponibles vídeos sobre los aparatos.

## Licencias de código abierto:

El electrodoméstico contiene componentes de software que utilizan licencias de código abierto. Aquí encontrará información sobre las licencias de código abierto utilizadas: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Estas instrucciones de uso son válidas para:

- SRFvg 3501
- SRFvg 3511
- SRFvg 4001
- SRFvg 4011
- SRFvg 5501
- SRFvg 5511

## 1 Indicaciones generales de seguridad

Conservar estas instrucciones de uso en un lugar seguro para poder consultarlas en cualquier momento.

En caso de que el aparato pase a otro propietario, asegurarse de incluir también las instrucciones de uso.

Con tal de poder utilizar el electrodoméstico de forma adecuada y segura, leer detenidamente estas instrucciones de uso antes de utilizarlo. Seguir en todo momento las instrucciones, indicaciones de seguridad y avisos de advertencia que se incluyen en las instrucciones de uso. Su seguimiento es importante para poder instalar y operar el aparato de forma segura y correcta.

### Peligros para el usuario:

- Este electrodoméstico únicamente lo puede utilizar personal técnico y de laboratorio que haya sido instruido para este fin y que conozca todas las medidas de seguridad para el trabajo en un laboratorio. Queda prohibido el uso de este electrodoméstico por parte de personas con facultades físicas, sensoriales o mentales menguadas o con falta de experiencia y conocimientos.
- La caja de enchufe debe ser fácilmente accesible para poder desconectar el aparato rápidamente de la red eléctrica en caso de emergencia. Debe encontrarse fuera del área de la parte trasera del aparato.
- Al desconectar el electrodoméstico de la red, agarrar siempre el cable por el conector. No tirar directamente del cable.
- Desenchufar el conector o desconectar el fusible en caso de avería.
- **ADVERTENCIA:** No dañar la línea de alimentación eléctrica. No utilizar el aparato con una línea de alimentación eléctrica defectuosa.
- **ADVERTENCIA:** Los enchufes múltiples y las repletas de conexión, así como otros equipos electrónicos (como, p. ej., los transformadores para halógenos), no se deben colocar ni utilizar en la parte posterior del electrodoméstico.

- **ADVERTENCIA:** No taponar los orificios de ventilación del cuerpo del electrodoméstico ni de la carcasa de empotrado.
- Las reparaciones e intervenciones en el electrodoméstico se deben encargar al servicio al cliente o a personal técnico que disponga de la debida formación para ello.
- Montar, conectar y desechar el electrodoméstico únicamente conforme a lo indicado en las instrucciones.

### Peligro de incendio:

- El refrigerante incluido (datos en la placa de características) es respetuoso con el medioambiente, pero es inflamable. Las fugas de refrigerante pueden inflamarse.
- **ADVERTENCIA:** No dañar el circuito de refrigeración.
- No manejar fuentes de ignición en el interior del aparato.
- **ADVERTENCIA:** Dentro del compartimento de refrigeración no se deben operar aparatos eléctricos que no se correspondan con el tipo recomendado por el fabricante.
- Si se producen fugas de refrigerante: Eliminar el fuego abierto o las fuentes de ignición cerca del lugar de la fuga. Ventilar bien el espacio. Informar al servicio técnico.
- No operar el aparato cerca de gases explosivos.
- No almacenar ni utilizar gasolina u otros gases y líquidos inflamables cerca del aparato.
- No almacenar en el electrodoméstico sustancias explosivas como, p. ej., envases de aerosol con propelente inflamable. Estos aerosoles se pueden identificar por la indicación de contenido impresa o por el símbolo de una llama. Las posibles fugas de gas se pueden inflamar con componentes eléctricos.
- Las velas encendidas, las luces prendidas y otros objetos con llamas abiertas se deben mantener alejados del electrodoméstico para no incendiarnlo.
- Las bebidas alcohólicas o cualquier otro envase que contenga alcohol se deben guardar herméticamente cerrados. Las posibles fugas de alcohol se pueden inflamar con componentes eléctricos.

### Peligro de caída o vuelco:

- **ADVERTENCIA:** Con el fin de evitar peligros debidos a la inestabilidad del electrodoméstico, este se debe fijar según las instrucciones.
- No utilizar indebidamente zócalos, cajones, puertas, etc., como peldaño ni para apoyarse.

### Peligro de congelación, entumecimiento y dolor:

- Evitar un contacto continuado de la piel con superficies frías o alimentos refrigerados/congelados, o bien adoptar medidas de protección como, por ejemplo, utilizar guantes.

### Peligro de daños y lesiones:

- **ADVERTENCIA:** Para acelerar el proceso de descongelación, no se deben usar otros dispositivos mecánicos ni medios distintos a los recomendados por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** ¡Peligro de lesiones por descarga eléctrica! Debajo de la cubierta hay piezas conductoras de electricidad. El LED de la iluminación interior debe ser sustituido o reparado únicamente por el servicio al cliente o por personal técnico con la debida formación para ello.\*
- **ATENCIÓN:** El electrodoméstico solo debe ponerse en funcionamiento con accesorios originales del fabricante o con accesorios de otros proveedores autorizados por el fabricante. El usuario es responsable en caso de uso de accesorios no autorizados.

### Peligro de aplastamiento:

- No sujetar la bisagra al abrir y cerrar la puerta. Los dedos podrían quedar atrapados.

# Visión general del aparato

## Cualificación del personal técnico:

Únicamente personal técnico que conozca el montaje, la puesta en servicio y el funcionamiento del electrodoméstico está autorizado a realizar la instalación, inspección, mantenimiento y puesta en servicio del mismo.

Se entiende por personal técnico aquellas personas que por su formación técnica, conocimientos y experiencia, así como por su conocimiento de las normas pertinentes están en condiciones de valorar y realizar los trabajos encomendados y reconocer posibles peligros. Tienen que tener una formación, instruccionamiento y autorización para trabajar con el electrodoméstico.


## Símbolos en el aparato:



El símbolo se puede encontrar en el compresor. Hace referencia al aceite del compresor e indica el siguiente peligro: **Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.** Esta advertencia únicamente es importante para el reciclaje. No existe peligro alguno en el modo de funcionamiento normal.



**ADVERTENCIA:** Peligro de incendio / materiales inflamables. El símbolo se encuentra en el compresor y señala el peligro de sustancias inflamables. No retirar la etiqueta.

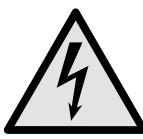

El símbolo se encuentra en la parte trasera de la carcasa en la zona del relé de alarma e indica el siguiente peligro: **¡descarga eléctrica!** En un electrodoméstico desconectado de la red puede haber todavía tensión residual. No retirar la etiqueta.



Esta etiqueta o una similar se puede encontrar en la parte trasera del electrodoméstico. Indica que hay paneles de aislamiento al vacío (VIP) o paneles de perlita en la puerta y/o en la carcasa. Esta advertencia únicamente es importante para el reciclaje. No retirar la etiqueta.

**Observar los avisos de advertencia y las demás indicaciones descritas en los demás capítulos:**

	<b>PELIGRO</b>	Señala una situación de peligro inminente que, si no se evita, producirá lesiones graves o incluso la muerte.
	<b>ADVERTENCIA</b>	Señala una situación de peligro que, si no se evita, puede producir lesiones graves o incluso la muerte.
	<b>PRECAUCIÓN</b>	Señala una situación de peligro que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas.
	<b>ATENCIÓN</b>	Señala una situación de peligro que, si no se evita, puede producir daños materiales.
	<b>Nota</b>	Identifica indicaciones y recomendaciones útiles.

## 2 Visión general del aparato

### 2.1 Volumen de suministro

Comprobar que ninguna pieza presente daños de transporte. En caso de reclamaciones, dirigirse al distribuidor o al servicio al cliente. (consulte 9.3 Servicio al cliente)

El volumen de suministro incluye las siguientes piezas:

- Electrodoméstico de pie
- Equipamiento \*
- Material de montaje \*
- Instrucciones de uso
- Catálogo de servicio
- Certificado de calidad \*
- Cable de red
- Juego de fijación a la pared

### 2.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento

SRFvg 3501

SRFvg 3511

SRFvg 4001

SRFvg 4011

SRFvg 5501

SRFvg 5511

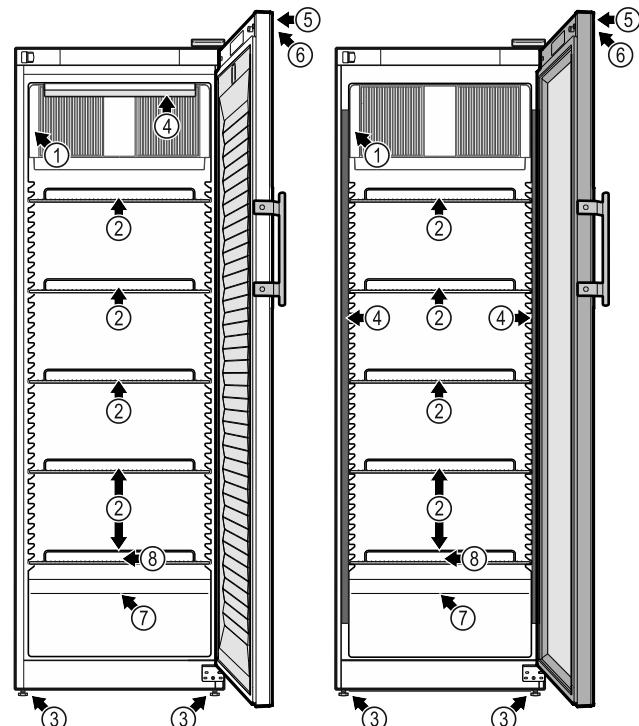


Fig. 1 Representación a modo de ejemplo

#### Equipamiento

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| (1) Placa de características | (5) Cierre                                |
| (2) Estantes parrilla        | (6) Controles e indicación de temperatura |
| (3) Patas de ajuste          | (7) Sensor del termostato de seguridad    |
| (4) Iluminación interior *   | (8) Sumidero del agua de descongelación   |

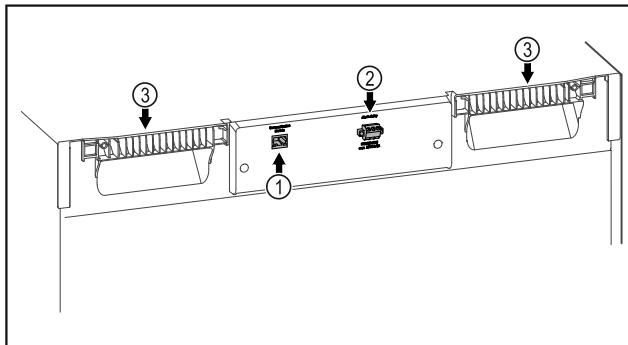


Fig. 2 Representación de la parte trasera a modo de ejemplo

#### Equipamiento

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| (1) Interfaz LAN/WiFi *                  | (3) Elemento auxiliar de transporte |
| (2) Salida de alarma exenta de potencial |                                     |

## 2.3 Equipamiento especial

#### Nota

Puede obtener accesorios a través del servicio al cliente (consulte 9.3 Servicio al cliente) y en la tienda Liebherr-Hausgeräte, en [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

#### SmartModule

El electrodoméstico se puede equipar con un SmartModule.

Se trata de una interfaz WiFi y LAN para la conexión entre el electrodoméstico y un sistema externo de documentación y alarma como, p. ej., Liebherr SmartMonitoring.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard no está disponible en todos los países. Compruebe la disponibilidad mediante el código QR (consulte 6.2.14 Conexión WiFi) introduciendo su modelo.

#### Equipamiento posterior con cajones

Para el equipamiento posterior con sistemas de cajones en frigoríficos/congeladores de Liebherr utilizados para la conservación de materiales sensibles a la temperatura como, p. ej., medicamentos de refrigeración obligatoria y productos refrigerados sometidos a normas especiales, se requiere una calificación de temperatura. El equipamiento posterior con cajones en frigoríficos/congeladores de Liebherr puede causar el deterioro o daños en los productos refrigerados. Por lo tanto, el equipamiento posterior debe ser efectuado únicamente por proveedores autorizados por el fabricante del frigorífico/congelador.

## 2.4 Ámbito de uso del electrodoméstico

#### Uso previsto

Este frigorífico para laboratorio es apto para el almacenamiento profesional de productos a temperaturas entre 3 °C y 16 °C.

Los productos típicos de almacenamiento son pruebas de investigación, reactivos, útiles de laboratorio, etc.

El almacenamiento de sustancias sensibles a la temperatura requiere el uso de un sistema de alarma independiente y permanentemente vigilado. Este sistema de alarma debe estar diseñado de tal forma que un responsable pueda registrar cualquier estado de alarma para tomar las medidas oportunas.

#### Uso incorrecto previsible

No utilizar el electrodoméstico para las siguientes aplicaciones:

- Conservación y refrigeración de:
  - Sustancias químicamente inestables, inflamables o corrosivas
  - Sangre, plasma o demás fluidos del cuerpo humano para realizar transfusiones o para ser utilizados o introducidos en el cuerpo humano.
- Empleo en atmósferas potencialmente explosivas.
- Empleo al aire libre o en zonas húmedas y con salpicaduras de agua.

Un uso inadecuado del electrodoméstico provocará daños o el deterioro de los artículos conservados.

#### Clases climáticas

La clase climática correspondiente a su electrodoméstico figura en la placa de características.

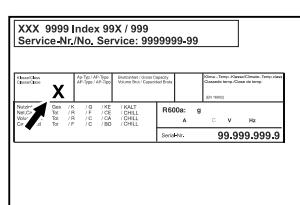


Fig. 3 Placa de características

- (X)** Esta clase climática indica las condiciones ambientales en las que el aparato puede funcionar de forma segura.

Clase climática (X)	Temperatura ambiente máx.	Humedad relativa del aire máx.
7	35 °C	75 %

#### Nota

La temperatura ambiente mínima admitida en el lugar de instalación es 10 °C.

La temperatura interna del electrodoméstico nunca debe superar la temperatura ambiente del lugar de instalación.

En el caso de condiciones límite, puede formarse un poco de condensación en la puerta de vidrio y en las paredes laterales.

## 2.5 Emisión de ruido del aparato

El nivel de presión acústica de emisión ponderado A durante el funcionamiento del aparato se sitúa por debajo de 70 db(A) (potencia sonora rel. 1 pW).

## 2.6 Conformidad

La estanqueidad del circuito de frío ha sido sometida a prueba. El electrodoméstico cumple la normativa de seguridad pertinente y las directivas correspondientes.



## 3 Funcionamiento de la pantalla Touch

Puede manejar su electrodoméstico con la pantalla Touch. Con la pantalla Touch (de aquí en adelante, la pantalla), puede seleccionar las funciones del electrodoméstico tocando. Si no realiza ninguna acción en la pantalla durante 10 segundos, la pantalla salta al menú superior o directamente al indicador de estado.

# Funcionamiento de la pantalla Touch

## 3.1 Navegación y explicación de los símbolos

En las ilustraciones se utilizan distintos símbolos para la navegación con la pantalla. En la siguiente tabla se describen estos símbolos.

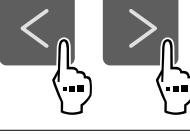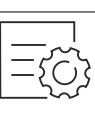Símbolo	Descripción
	<b>Pulsar la flecha de navegación hacia delante:</b> Seguir navegando en el primer menú.
	<b>Pulsar la flecha de navegación hacia atrás:</b> Volver al primer menú.
	<b>Pulsar la flecha de navegación hacia atrás durante 3 segundos:</b> En el menú principal o desde el menú de ajustes, volver a la indicación de estado.
	<b>Pulsar varias veces seguidas la flecha de navegación:</b> Navegar hasta la función deseada del menú.
	<b>Pulsar el símbolo de confirmación:</b> Activar/desactivar la función. Abrir submenú.
	<b>Pulsar el símbolo de confirmación junto con el símbolo de retroceso:</b> Volver al menú inmediatamente superior.
	<b>Flecha con reloj:</b> La siguiente visualización en pantalla tarda más de 10 segundos en aparecer.
	<b>Flecha con indicación de tiempo:</b> La siguiente visualización en pantalla tarda en aparecer el tiempo indicado.
	<b>Símbolo "Abrir el menú de ajustes":</b> Navegar al menú de ajustes y abrirlo. De ser necesario: Navegar a la función deseada del menú de ajustes. (consulte 3.2.1 Abrir el menú de ajustes)

Símbolo	Descripción
	<b>Símbolo "Abrir el menú avanzado":</b> Navegar al menú avanzado y abrirlo. De ser necesario: Navegar a la función deseada del menú avanzado. (consulte 3.2.2 Abrir el menú avanzado)
Ninguna acción en 10 segundos	Si no realiza ninguna acción en la pantalla durante 10 segundos, la pantalla salta al menú superior o directamente al indicador de estado.
Abrir y volver a cerrar la puerta	Si se abre y se vuelve a cerrar la puerta inmediatamente, la pantalla vuelve directamente al indicador de estado.

*Nota: Las ilustraciones de la pantalla se representan con los conceptos en inglés.*

## 3.2 Menús

Las funciones del electrodoméstico se distribuyen en distintos menús.

Menú	Descripción
Menú principal	Cuando enciende el dispositivo, se encontrará automáticamente en el menú principal. Desde aquí podrá acceder a las funciones más importantes del electrodoméstico, al menú de ajustes y al menú avanzado.
 Settings	El menú de ajustes contiene otras funciones que permiten configurar el electrodoméstico. (consulte 3.2.1 Abrir el menú de ajustes)
 Menú avanzado	El menú avanzado incluye funciones especiales del electrodoméstico para configurarlo. El acceso al menú avanzado está protegido por el código numérico <b>151</b> . (consulte 3.2.2 Abrir el menú avanzado)

### 3.2.1 Abrir el menú de ajustes

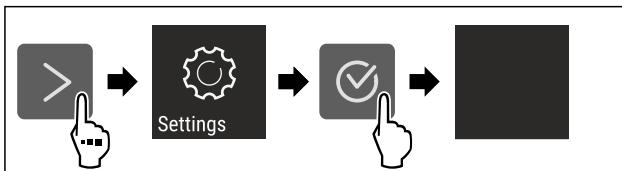


Fig. 4 Representación a modo de ejemplo

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El menú de ajustes está abierto.
- De ser necesario: Navegar a la función deseada.

## 3.2.2 Abrir el menú avanzado

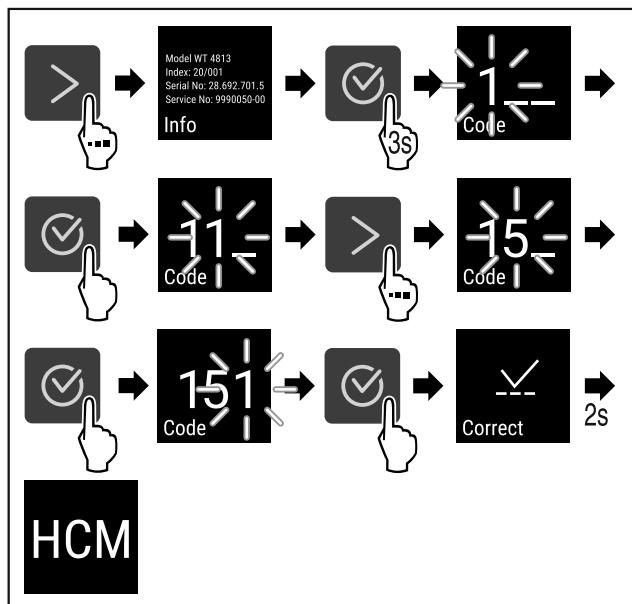


Fig. 5 Acceso con código el numérico 151

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El menú ampliado está abierto.
- De ser necesario: Navegar a la función deseada.

## 3.3 Modo de reposo

Si no toca la pantalla durante 1 minuto, la pantalla entrará en modo de reposo. En el modo de reposo se atenúa la luminosidad de visualización.

### 3.3.1 Salir del modo de reposo

- Pulse cualquier tecla de navegación.
- El modo de reposo finaliza.

# 4 Puesta en marcha

## 4.1 Condiciones de instalación



### ADVERTENCIA

Riesgo de incendio derivado de la humedad

Si las piezas conductoras de electricidad o la línea de alimentación eléctrica se humedecen, puede producirse un cortocircuito.

- El aparato está diseñado para utilizarse en espacios cerrados. No ponga en funcionamiento el aparato en un lugar al aire libre, expuesto a la humedad ni a las salpicaduras de agua.

### 4.1.1 Lugar de instalación



### ADVERTENCIA

¡Fugas de refrigerante y aceite!

Incendio. El refrigerante contenido es respetuoso con el medioambiente, pero es inflamable. El aceite contenido también es inflamable. Las fugas de refrigerante y aceite pueden inflamarse con una concentración correspondientemente elevada y al entrar en contacto con una fuente de calor externa.

- No se deben dañar las tuberías del circuito de refrigerante y del compresor.

- No colocar el electrodoméstico en una zona de radiación solar directa, ni junto a la cocina, la calefacción, etc.
- El lugar de instalación óptimo es un recinto seco y bien ventilado.
- Si el electrodoméstico se instala en un entorno muy húmedo, en la parte exterior del electrodoméstico se puede formar agua de condensación. Prestar siempre atención a que exista una buena ventilación y escape de aire en el lugar de instalación.
- Cuanto más refrigerante haya en el electrodoméstico, más grande deberá ser el recinto en el que se encuentre el electrodoméstico. En recintos demasiado pequeños se puede formar una mezcla inflamable de gas y aire al producirse una fuga. Por cada 8 g de refrigerante, el lugar de instalación deberá tener como mínimo 1 m<sup>3</sup>. Los datos sobre el refrigerante incluido figuran en la placa de características en el interior del electrodoméstico.
- El suelo del lugar de instalación debe ser horizontal y plano.
- El lugar de instalación debe poder soportar el peso del electrodoméstico, incluida su carga máxima. (consulte 9.1 Datos técnicos)
- No se permite el uso en áreas potencialmente explosivas.

### 4.1.2 Conexión eléctrica




### ADVERTENCIA

¡Peligro de incendio por colocación indebida!

Si un cable de red o un conector entra en contacto con la parte trasera del electrodoméstico, la vibración del electrodoméstico puede dañar el cable de red o el conector provocando un cortocircuito.

- Asegurarse de que ningún cable de red quede atrapado debajo del electrodoméstico al colocarlo.
- Coloque el aparato de tal forma que no entre en contacto con ningún conector o cable de red.
- No se deben conectar otros aparatos en los enchufes situados en la parte posterior del aparato.
- Los enchufes múltiples y las regletas de conexión, así como otros equipos electrónicos (como, p. ej., los transformadores para halógenos), **no** se deben colocar ni utilizar en la parte posterior del electrodoméstico.

## 4.2 Dimensiones del electrodoméstico

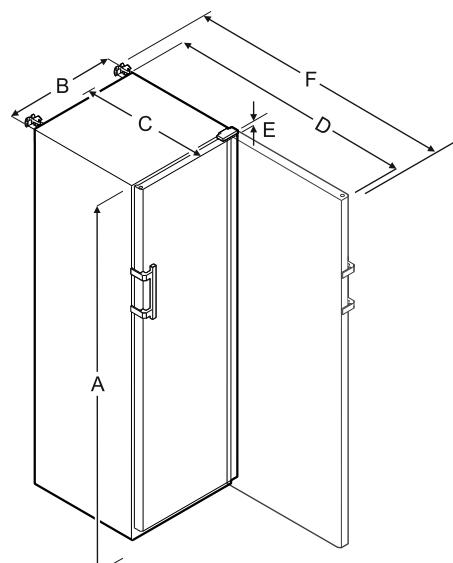

	SRFvg 3501/3511	SRFvg 4001/4011
<b>A</b>	1684 mm	1884 mm

# Puesta en marcha

	SRFvg 3501/3511	SRFvg 4001/4011
B	597 mm	597 mm
C	664 mm	664 mm
D	1203 mm	1203 mm
E	23 mm	23 mm
F	1241 mm	1241 mm

	SRFvg 5501/5511
A	1684 mm
B	747 mm
C	779 mm
D	1468 mm
E	23 mm
F	1506 mm

**A** = altura del electrodoméstico incluidas patas/ruedas

**B** = Anchura del electrodoméstico sin tirador [profundidad del tirador = 45 mm]

**C** Profundidad del electrodoméstico sin tirador [profundidad del tirador = 45 mm]

**D** = profundidad del electrodoméstico con la puerta abierta

**E** = altura de la bisagra

**F** = profundidad del electrodoméstico con saliente del tirador y seguro antivuelco

- Retirar todos los materiales de embalaje de la parte trasera o de las paredes laterales del electrodoméstico que puedan obstaculizar la correcta instalación o ventilación y salida de aire.

## 4.5 Retirada de la protección para el transporte

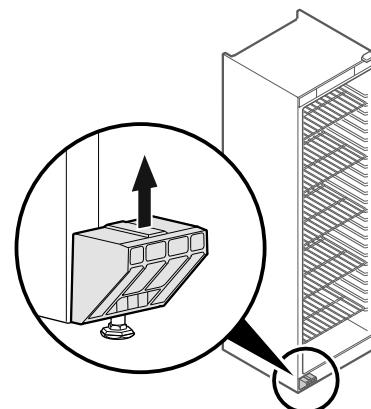


Fig. 6

► Quitar hacia arriba la protección para el transporte.

► El soporte de base permanece en el electrodoméstico.

## 4.6 Montaje del tirador de la puerta

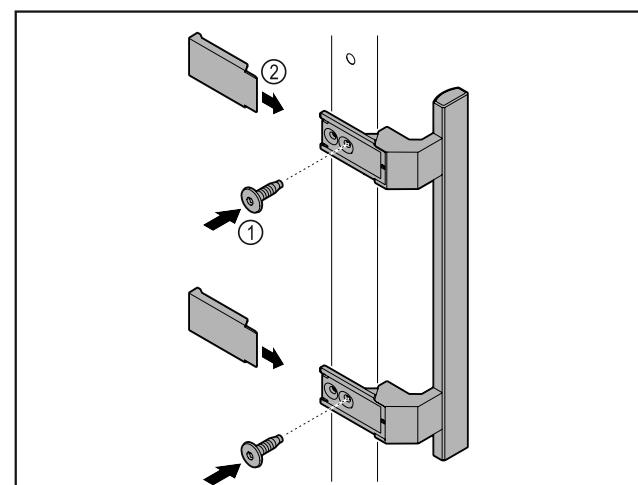


Fig. 7

► Colocar en la puerta el tirador del kit de accesorios con los tornillos incluidos Fig. 7 (1).

► Colocar las cubiertas Fig. 7 (2).

► Colocar en el lado opuesto el tapón que viene en el paquete.\*

## 4.7 Montaje del seguro antivuelco

### Herramienta



Fig. 8

## 4.3 Transporte del electrodoméstico



### ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones derivado de vidrios rotos\*

Si se transporta a una altura superior a 1500 m, pueden romperse las hojas de cristal de la puerta. Los trozos rotos tienen aristas vivas que pueden causar heridas graves.

► Adopte las medidas protectoras adecuadas.



### ADVERTENCIA

¡Peligro de daños materiales y lesiones al volcarse el aparato!

► Vigilar con las irregularidades del suelo y las pendientes al transportar el aparato.

### A tener en cuenta al transportar el aparato:

- Transportar el electrodoméstico en posición vertical.
- Transportar el electrodoméstico con ayuda de dos personas.

### Durante la primera puesta en servicio:

- Transportar el aparato embalado.

### Al transportar el aparato después de la primera puesta en servicio (por ejemplo, al trasladarlo o limpiarlo):

- Vaciar el aparato.
- Asegurar la puerta para que no se abra accidentalmente.

## 4.4 Desembalaje del electrodoméstico

- Comprobar que el electrodoméstico y el embalaje no presenten daños de transporte. Ponerse en contacto inmediatamente con el proveedor en caso de observarse la presencia de cualquier daño. No conectar el electrodoméstico a la alimentación de tensión.



## ADVERTENCIA

¡Peligro de sufrir lesiones y daños materiales debido a vuelco del electrodoméstico!

Peligro de muerte y daños materiales en el electrodoméstico. Un electrodoméstico sin dispositivo antivuelco instalado puede volcar si, por ejemplo, se abre la puerta o extraen los estantes.

- Antes de poner el electrodoméstico en funcionamiento: montar **siempre** el dispositivo antivuelco siguiendo las instrucciones.

Asegurar el electrodoméstico contra vuelco.

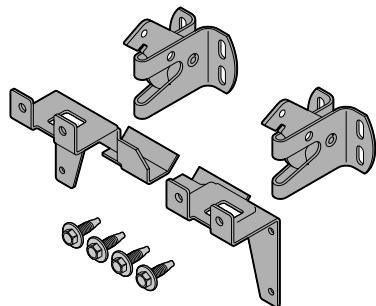


Fig. 9

La protección antivuelco se incluye en el electrodoméstico. Consta de dos piezas de sujeción, dos ganchos de fijación y cuatro tornillos autorroscantes ( $4 \times 14$ ).

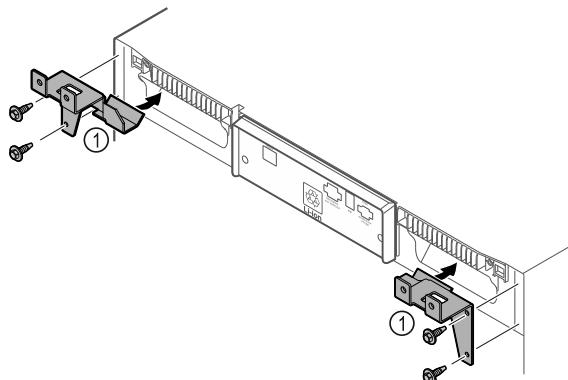


Fig. 10

- Monte las piezas de sujeción Fig. 10 (1) en el electrodoméstico con tornillos autorroscantes.
- Desplazar el electrodoméstico hacia la pared con las piezas de sujeción montadas.

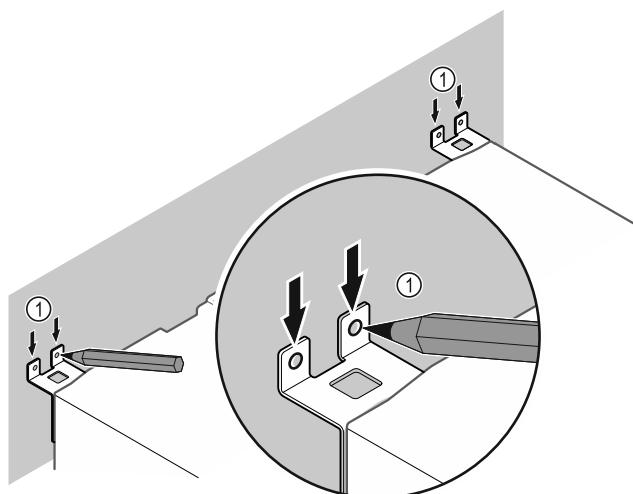


Fig. 11

- Trazar las marcas en la pared Fig. 11 (1).
- Retirar el electrodoméstico.

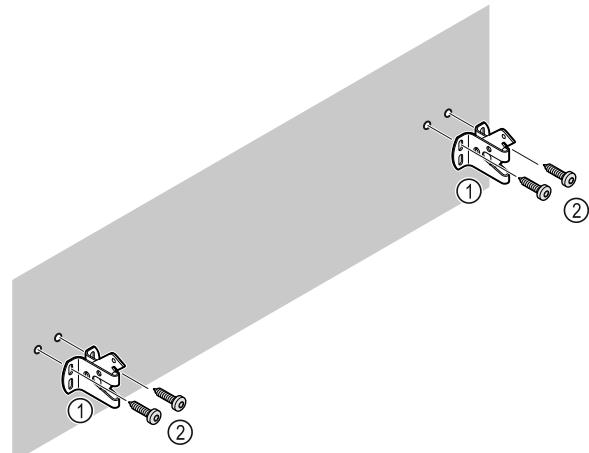


Fig. 12

**Utilizar el material de fijación apropiado (p. ej., tacos) y suficientes puntos de fijación según las características de la pared (madera, hormigón).**

- Fijar los ganchos de seguridad.

## 4.8 Instalación del electrodoméstico



## ATENCIÓN

¡Peligro de daños y lesiones!

- El electrodoméstico se debe instalar entre 2 personas.



## ATENCIÓN

¡Peligro de daños y lesiones!

La puerta puede chocar contra la pared y resultar dañada. En puertas de cristal, el cristal dañado puede causar lesiones.

- Proteger la puerta para que no choque contra la pared. Colocar topes de puerta, por ejemplo, topes de fieltro, en la pared.
- Conectar todos los componentes necesarios (p. ej., cable de red) en la parte trasera del electrodoméstico y conducirlos hacia un lado.

### Nota

Los cables pueden resultar dañados.

- No aprisionar los cables al desplazar el electrodoméstico hacia atrás.

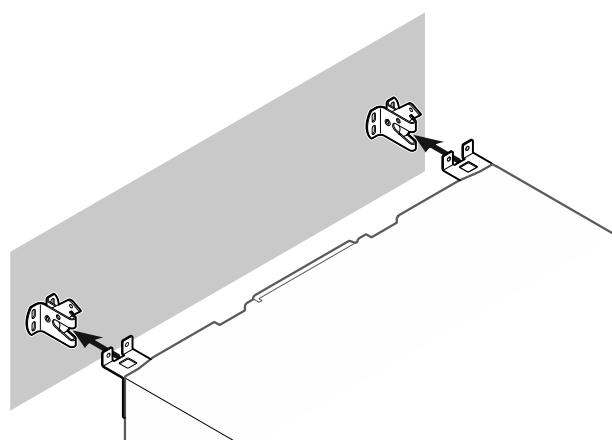


Fig. 13

- Desplazar el electrodoméstico hacia la pared de manera que las piezas de sujeción se encajen en los ganchos de seguridad.
- Ahora, el electrodoméstico está protegido contra vuelco.

# Puesta en marcha

- Se puede soltar de nuevo retrayendo los ganchos de seguridad.

## 4.9 Alineación del electrodoméstico

### AVISO

El cuerpo del electrodoméstico está deformado y la puerta no cierra.

- Alinear el electrodoméstico en horizontal y vertical.  
► Compensar las irregularidades del suelo con las patas de ajuste.



### ADVERTENCIA

¡Ajuste incorrecto de la altura de la pata!

Lesiones graves o hasta mortales. Si la altura se ajusta incorrectamente, la parte inferior de la pata se puede soltar y el electrodoméstico puede volcar.

- No desenroscar demasiado la pata.

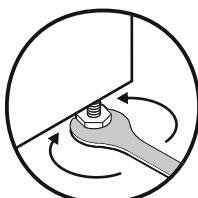


Fig. 14

#### Para subir el electrodoméstico:

- Girar la pata de ajuste en el sentido de las agujas del reloj.

#### Para bajar el electrodoméstico:

- Girar la pata de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj.

## 4.10 Instalación de varios electrodomésticos

### AVISO

¡Peligro de daños por agua de condensación entre las paredes laterales!

- No colocar el electrodoméstico contiguo a otro frigorífico.  
► Colocar los electrodomésticos a una distancia de 3 cm entre sí.  
► Si se colocan varios electrodomésticos de forma contigua, no se deben superar una temperatura de 35 °C y el 65 % de humedad de aire.  
► Si la humedad del aire es mayor, aumentar la distancia entre los electrodomésticos.

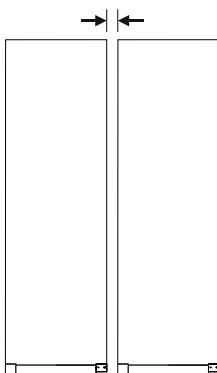


Fig. 15 Instalación Side by Side

### Nota

El kit Side by Side se puede adquirir como accesorio a través del servicio al cliente de Liebherr. (consulte 9.3 Servicio al cliente)

## 4.11 Tras la instalación

- Retirar las láminas protectoras.\*  
► Limpiar el electrodoméstico. (consulte 8.3 Limpiar el aparato)  
► En caso necesario: Desinfectar el electrodoméstico.  
► Guardar la factura para disponer de los datos del electrodoméstico y del distribuidor en caso de prestaciones de servicio.

## 4.12 Eliminación del embalaje



### ADVERTENCIA

Peligro de asfixia derivado del material de embalaje y las láminas


- No permita que los niños jueguen con el material de embalaje.

El embalaje está fabricado con materiales reciclables:

- Cartón paja/cartón
- Piezas de poliestireno expandido
- Láminas y bolsa de polietileno
- Flejes para bandaje de polipropileno
- Marco de madera clavado con plancha de polietileno\*
- Deposite el material de embalaje en un punto de recogida oficial.

## 4.13 Cambio de las bisagras de la puerta

### Herramienta

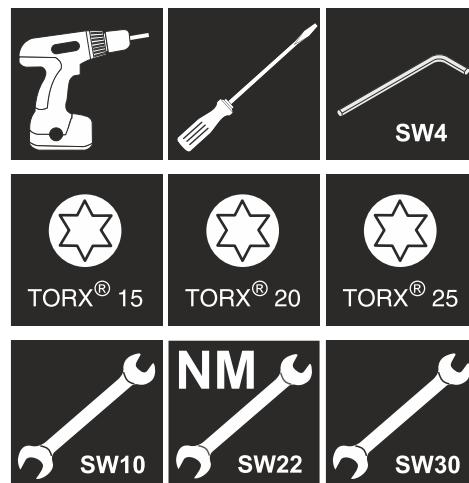

### ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones por cambio del sentido de apertura de la puerta realizado por personal no cualificado!

- Cambiar el tope de puerta por parte de personal cualificado.



## ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones y de daños materiales debido al elevado peso de la puerta!

- Efectúe el cambio únicamente si puede cargar con 25 kg.
- El cambio debe efectuarse únicamente entre dos personas.

## AVISO

¡Piezas conductoras de electricidad!

Daños de componentes eléctricos.

- Desconectar el enchufe de la red antes de cambiar la bisagra de la puerta.

- Abrir la puerta.

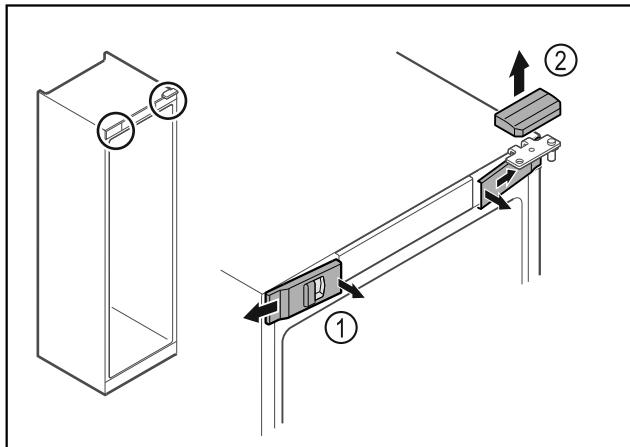


Fig. 16

- Desencazar las cubiertas delanteras Fig. 16 (1) del interior y dejarlas a un lado.
- Retirar hacia arriba la cubierta superior Fig. 16 (2).

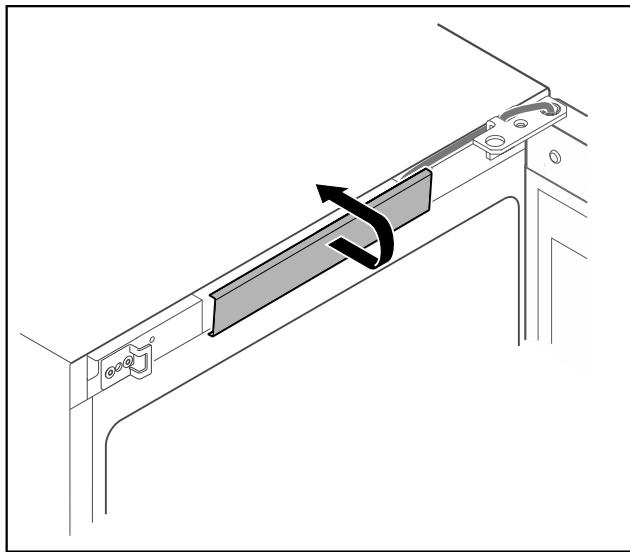


Fig. 17

- Desencazar y retirar la cubierta central.

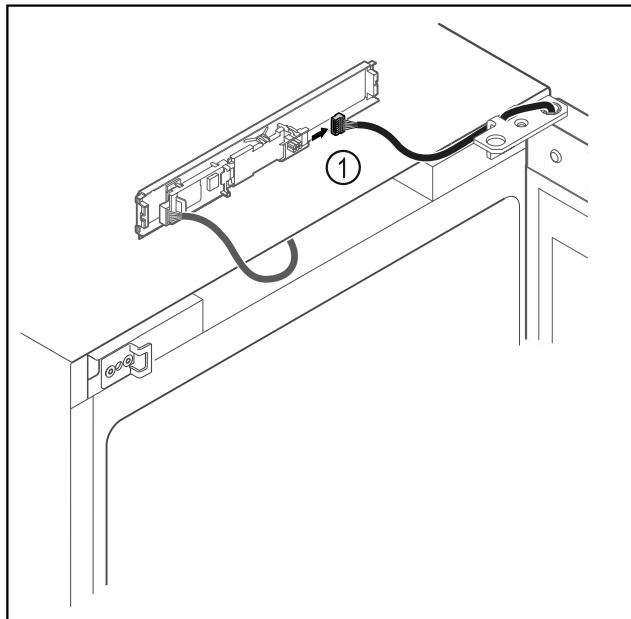


Fig. 18

- Desenchufar el conector Fig. 18 (1) de la platina.

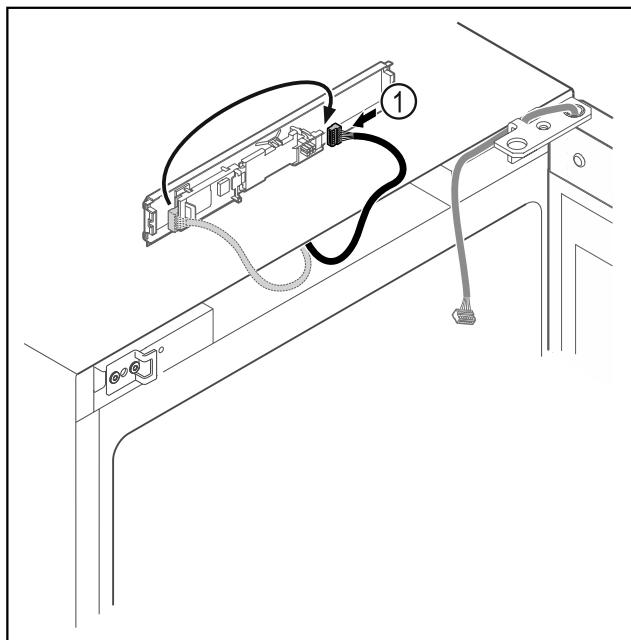


Fig. 19

- Enchufar el conector Fig. 19 (1) en otra posición en la platina.

## Puesta en marcha

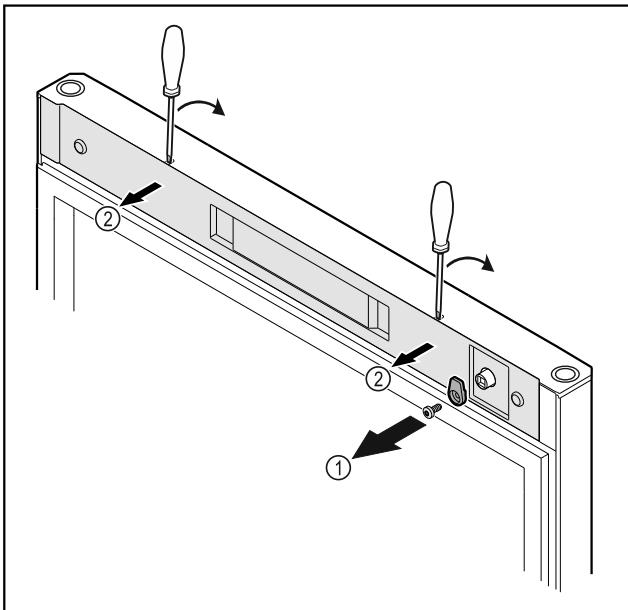


Fig. 20

- Desatornillar el gancho de cierre Fig. 20 (1).
- Desencajar la cubierta Fig. 20 (2) con un destornillador pequeño y retirarla.

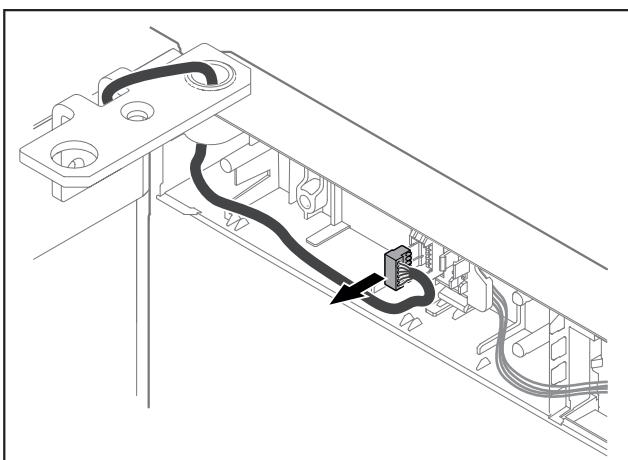


Fig. 21

- Retirar el conector de su soporte.

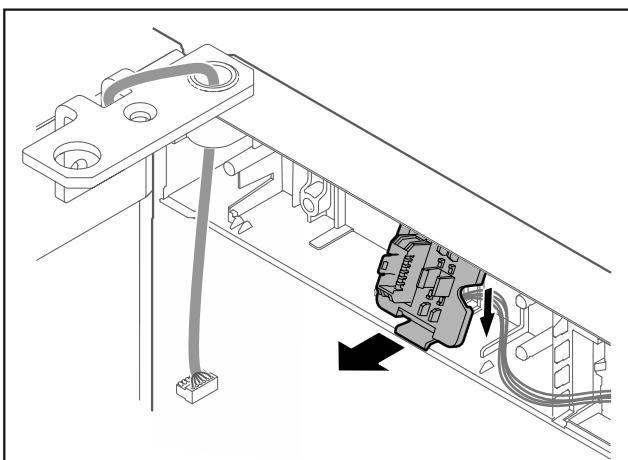


Fig. 22 La posición de montaje del soporte del conector puede estar girada 180°.

- Desencajar el soporte del conector.

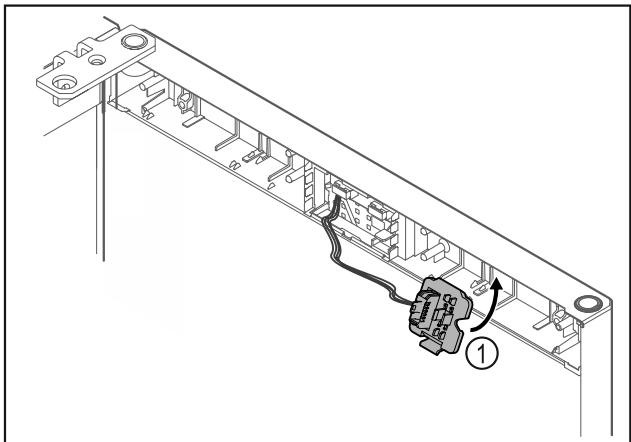


Fig. 23

- Encajar el soporte del conector Fig. 23 (1) en el lado contrario.

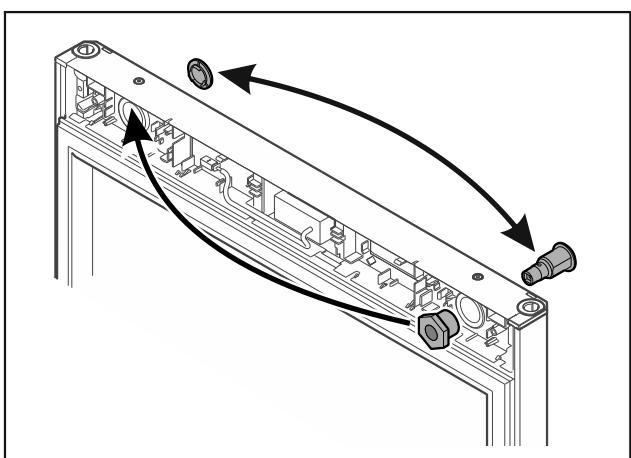


Fig. 24

- Colocar la cerradura y la cubierta en el lado contrario.
- o-

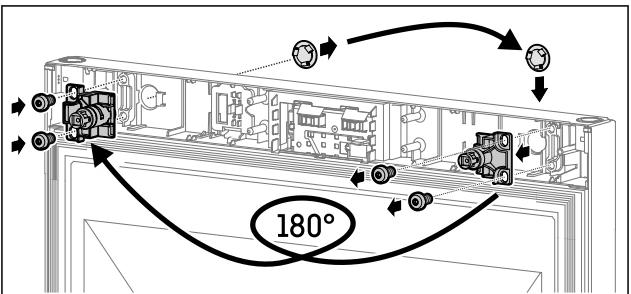


Fig. 25

- Colocar la cerradura y la cubierta en el lado contrario.

### AVISO

- ¡Peligro de lesiones al salirse la puerta!
- Sujetar la puerta.

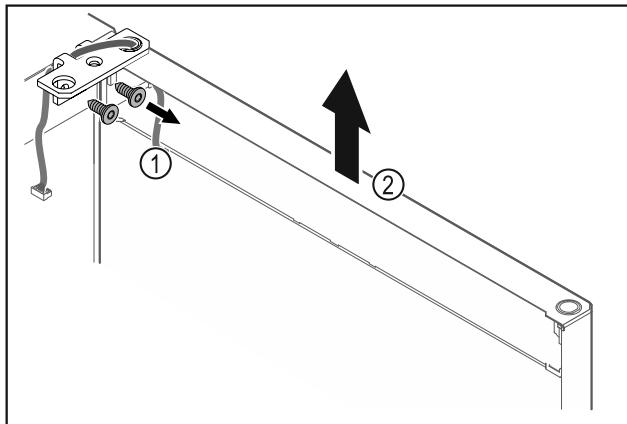


Fig. 26

- Desatornillar la escuadra de bisagra Fig. 26 (1).
- Levantar la puerta junto con la escuadra de bisagra Fig. 26 (2) aproximadamente 200 mm recta hacia arriba y retirar.
- Colocar la puerta con cuidado sobre una superficie blanda.

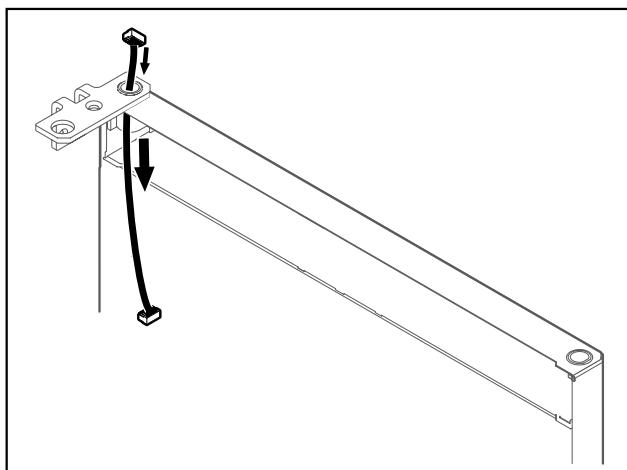


Fig. 27

- Extraer con cuidado el cable.

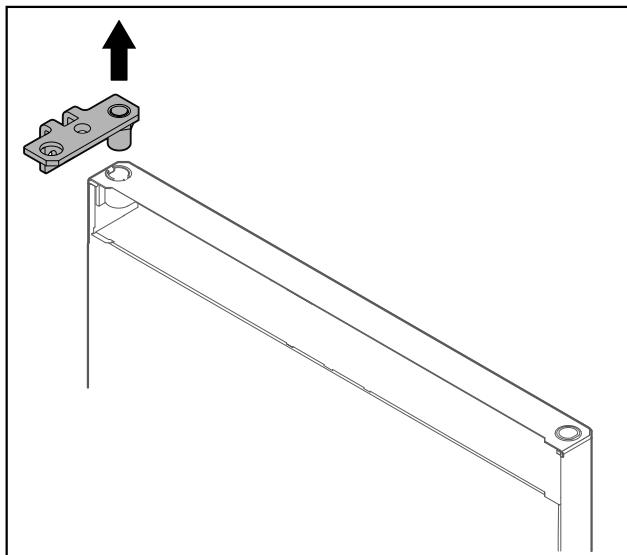


Fig. 28

- Extraer la escuadra de bisagra.

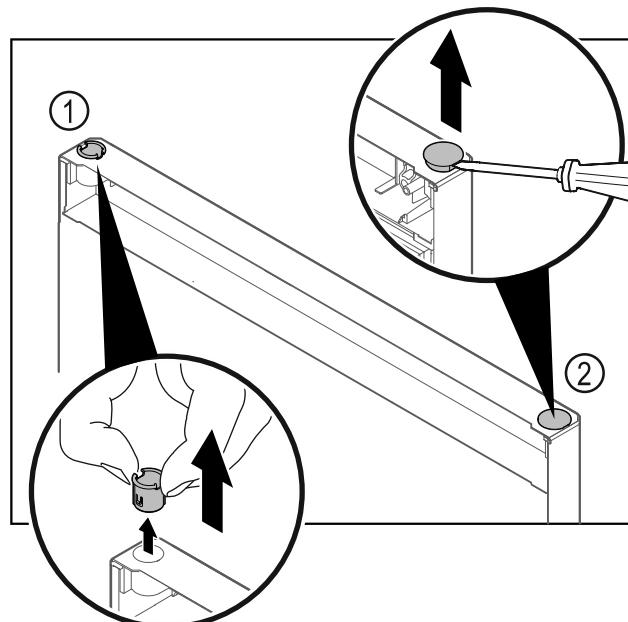


Fig. 29

- Extraer el casquillo de bisagra Fig. 29 (1) con los dedos.
- Levantar cuidadosamente el tapón Fig. 29 (2) con un destornillador para tornillos de cabeza ranurada y extraerlo.

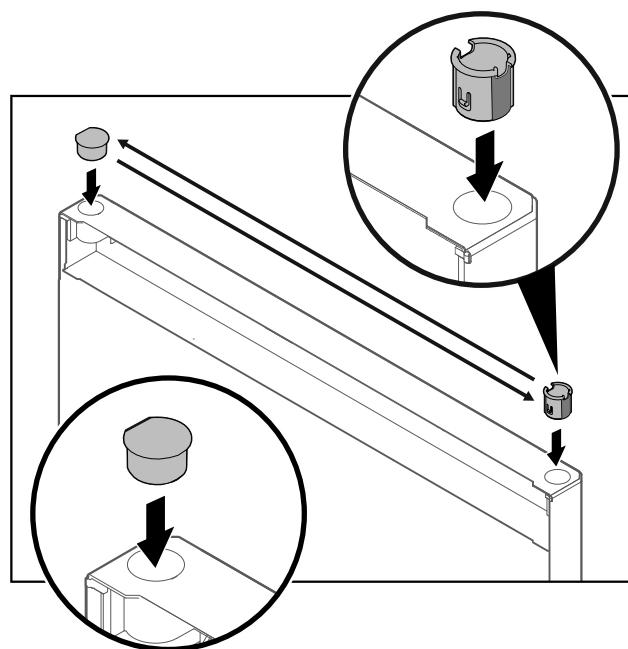


Fig. 30

- Colocar el casquillo de bisagra y el tapón en el lado contrario (las caras achatadas apuntan hacia afuera).

## Puesta en marcha

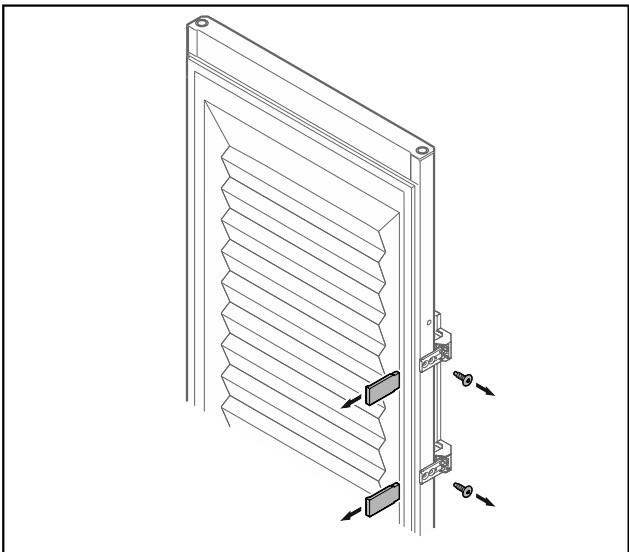


Fig. 31 Puerta con plástico espumado\*

► Colocar el tapón en el lado contrario.

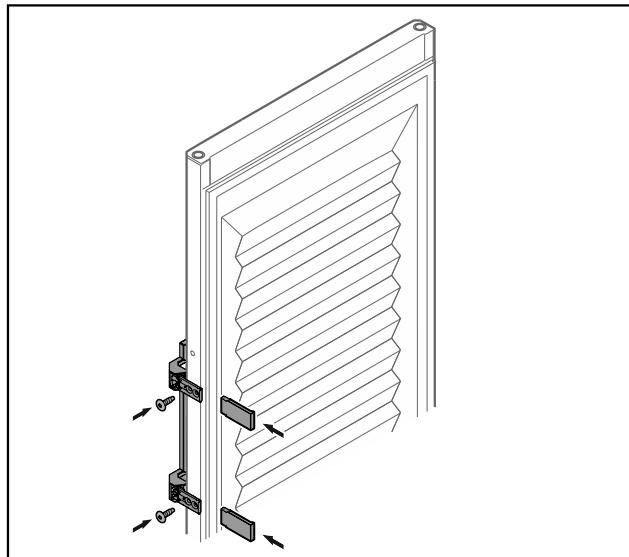


Fig. 33 Puerta con plástico espumado\*

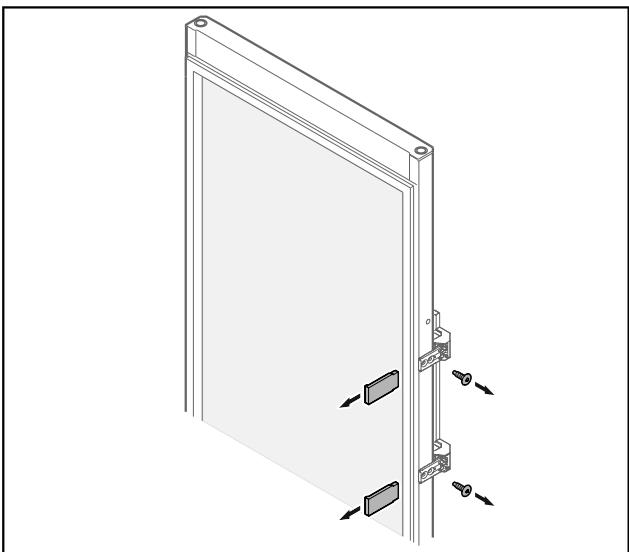


Fig. 32 Puerta de vidrio\*

- Retirar los embellecedores.
- Desatornillar el tirador.

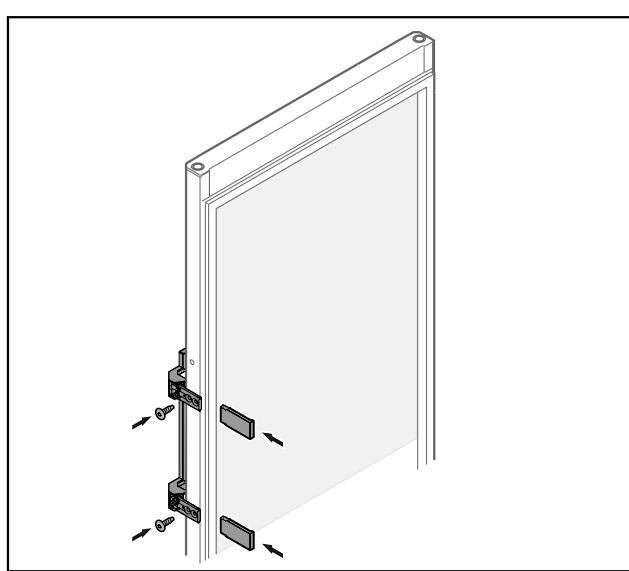


Fig. 34 Puerta de vidrio\*

- Atornillar el tirador en el lado contrario.
- Colocar los embellecedores.

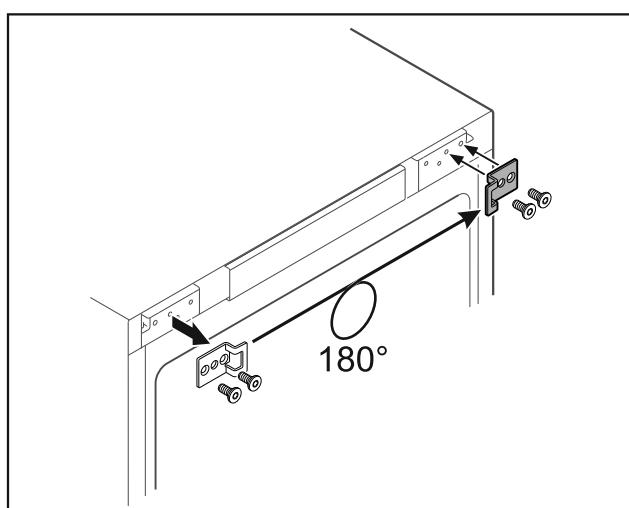
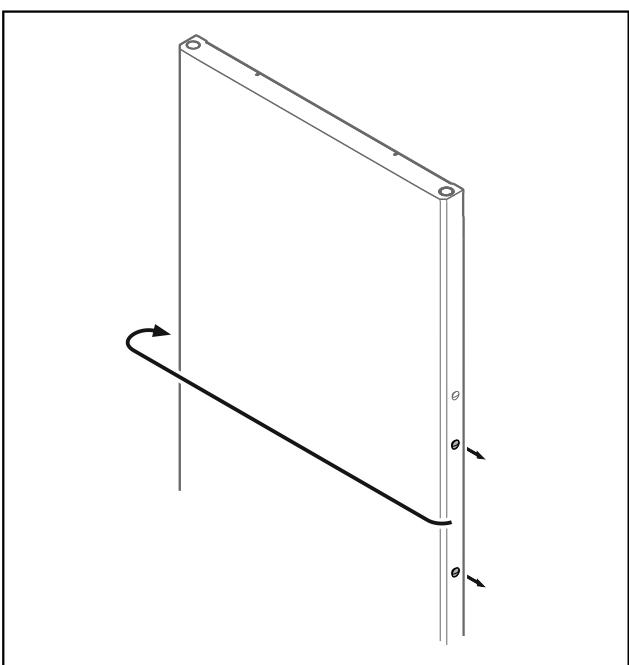


Fig. 35 Puerta de vidrio\*

- Colocar la escuadra de cierre en el lado contrario.

## Nota

Los agujeros están marcados y deben perforarse con tornillos autorroscantes.

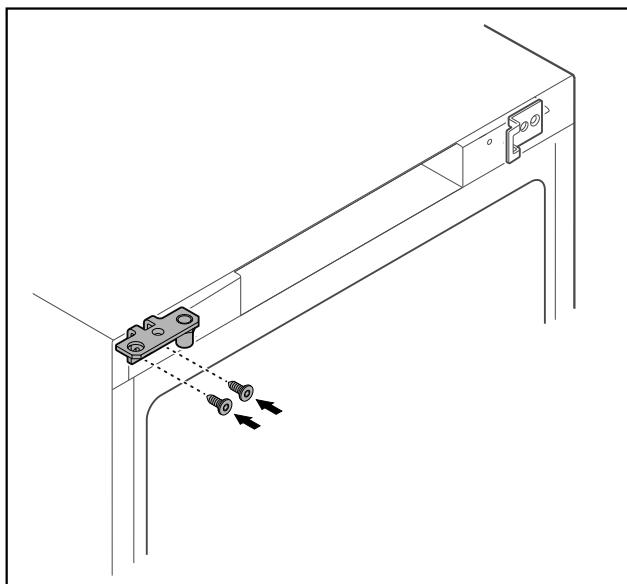


Fig. 37

- Colocar la escuadra de bisagra en el lado contrario.



## ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones y daños materiales al salirse la puerta!

- Apretar los pernos de apoyo con el par indicado.

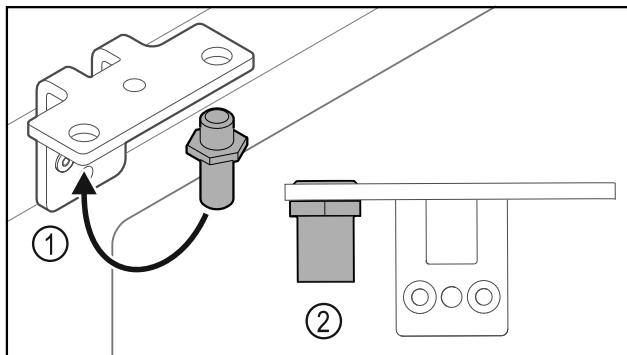


Fig. 38

- Cambiar la posición del perno Fig. 38 (1) en la escuadra de bisagra.
- Apretar el perno Fig. 38 (2) con un **par de 12 Nm**.
- Atornillar de nuevo la escuadra de bisagra.

## AVISO

¡Peligro de lesiones por muelles en tensión!

- No desensamblar el sistema de cierre de la puerta Fig. 39 (1).

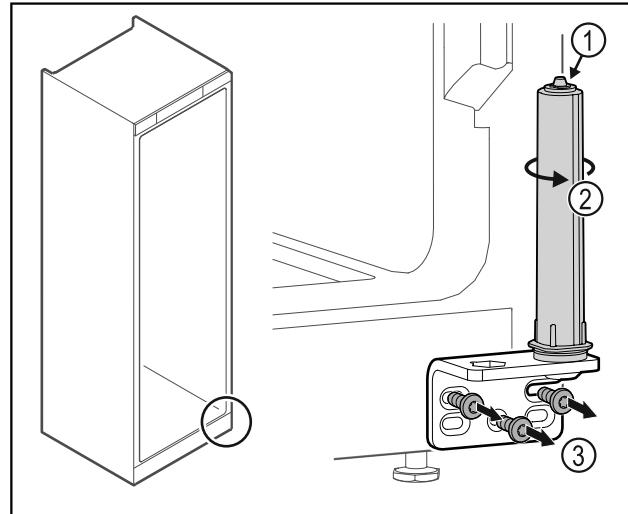


Fig. 39

- Girar el sistema de cierre Fig. 39 (2) hasta que haga clic.
- La tensión previa del sistema de cierre se ha liberado.
- Desatornillar la escuadra de bisagra Fig. 39 (3).

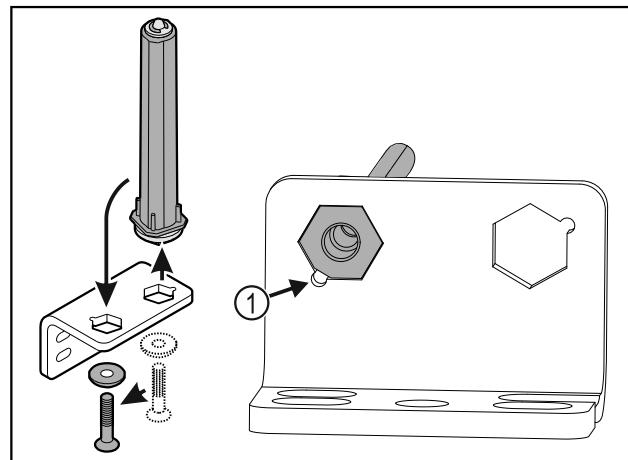


Fig. 40

- Cambiar la posición del sistema de cierre de la puerta en la escuadra de bisagra.
- Observar que, al colocar, el bisel del perno Fig. 40 (1) apunte hacia el agujero redondo.

-o-

## Nota

Disposición incorrecta de las arandelas de ajuste de altura. La fijación de la tuerca ya no es posible de forma suficiente.

- La arandela debe encajar en la parte inferior del sistema de cierre.

# Puesta en marcha

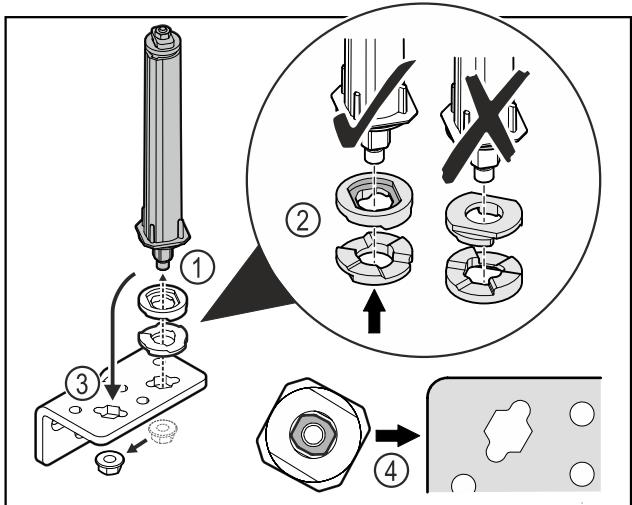


Fig. 41

- ▶ Soltar la tuerca y retirar el sistema de cierre de la puerta Fig. 41 (1).
- ▶ Tener en cuenta la orientación correcta de las arandelas de ajuste de altura Fig. 41 (2).
- ▶ Cambiar la posición del sistema de cierre de la puerta en la escuadra de bisagra y fijar con la tuerca Fig. 41 (3).
- ▶ Tener en cuenta la orientación correcta del sistema de cierre de la puerta al insertarlo Fig. 41 (4).

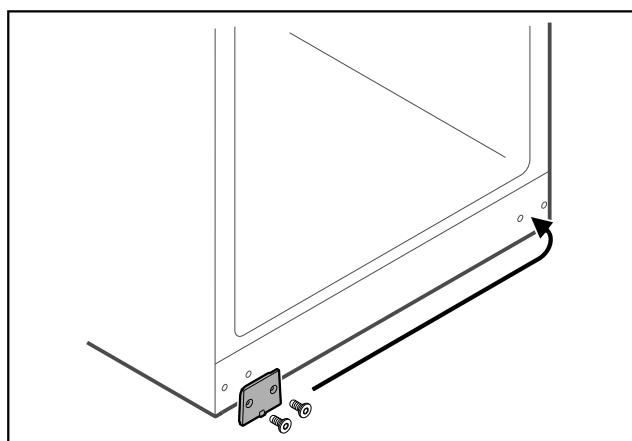


Fig. 42

- ▶ Colocar la placa de cubierta en el lado contrario.

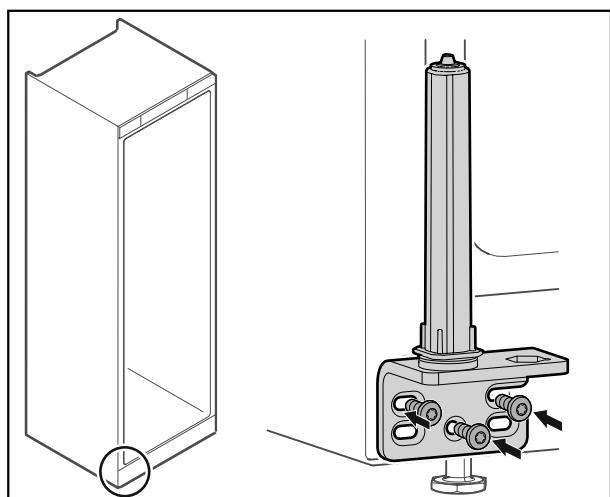


Fig. 43

- ▶ Atornillar la escuadra de bisagra en el lado contrario.

## Nota

Una orientación y tensión previa correctas son importantes para el funcionamiento del sistema de cierre.

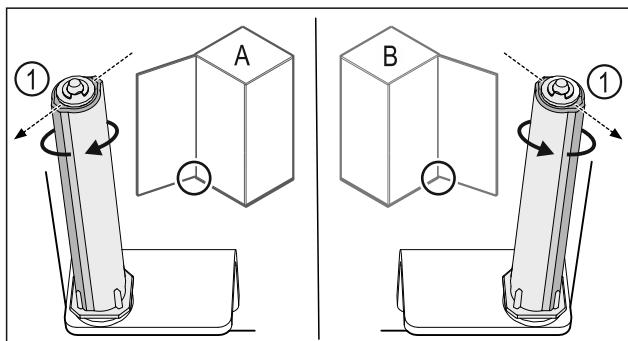


Fig. 44 Tope izquierdo (A) / tope derecho (B)

- ▶ Girar el sistema de cierre contra la resistencia hasta que el alma del sistema de cierre Fig. 44 (1) apunte hacia afuera.
- ▶ El sistema de cierre permanece por sí solo en esta posición.
- ▶ El sistema de cierre está alineado y ha sido tensado previamente.


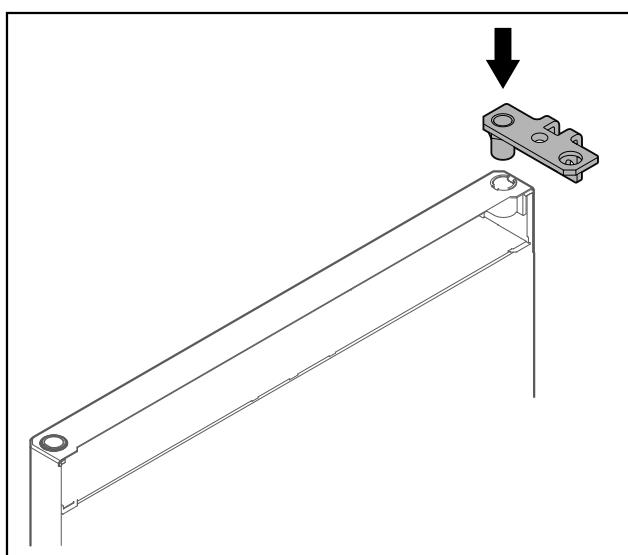


Fig. 45

- ▶ Colocar la escuadra de bisagra en la puerta.

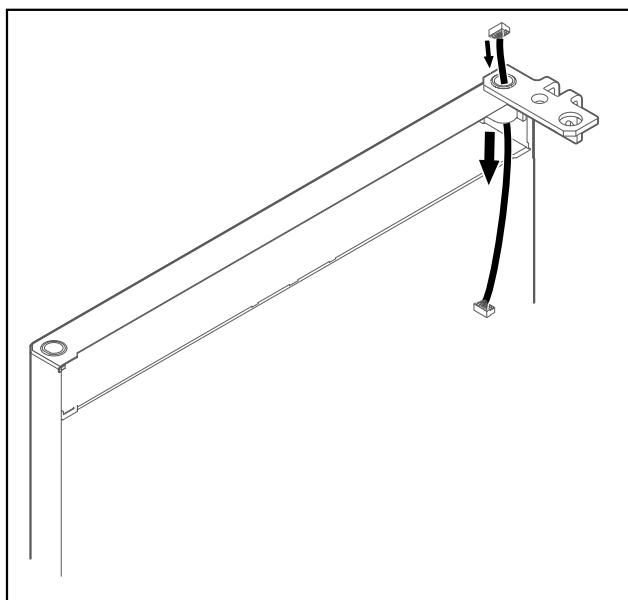


*Fig. 46*

- ▶ Introducir el cable con cuidado.

## AVISO

¡Peligro de lesiones al salirse la puerta!

- ▶ Sujetar la puerta.

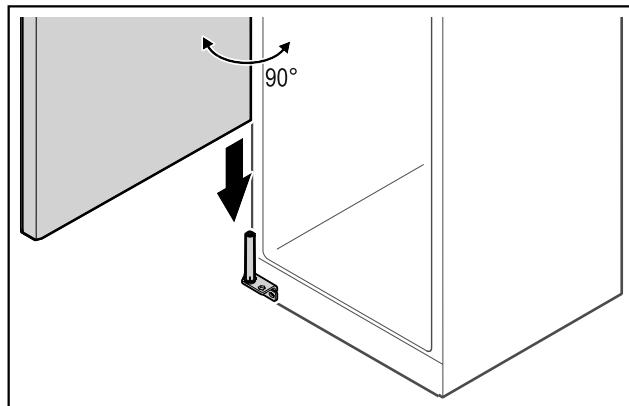


*Fig. 47*

- ▶ Con la ayuda de una segunda persona, levantar la puerta del suelo.
- ▶ Colocar con cuidado la puerta en el sistema de cierre a 90° en posición abierta.

## AVISO


¡Daños materiales por montaje incorrecto!

- ▶ No atrapar el cable al montar la escuadra de bisagra.

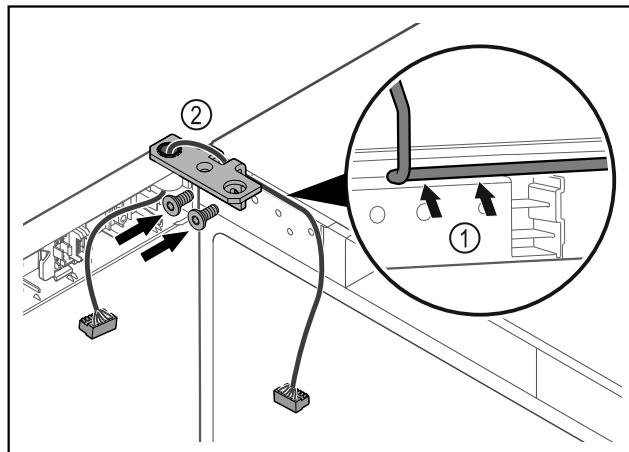


*Fig. 48*

- ▶ Pasar el cable por la escotadura de la escuadra de bisagra y tenderlo con cuidado Fig. 48 (1).
- ▶ Atornillar la escuadra de bisagra Fig. 48 (2).

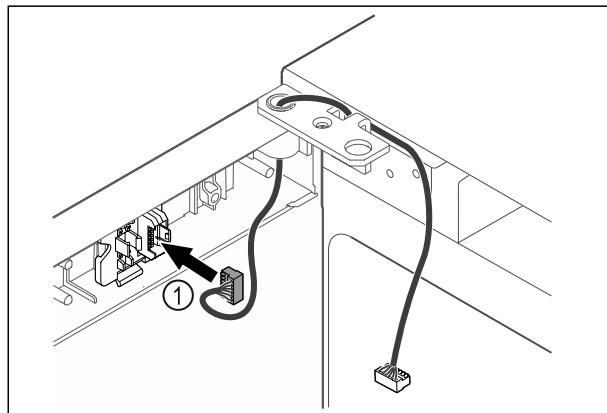


*Fig. 49*

- ▶ Enchufar el conector Fig. 49 (1) en su soporte.

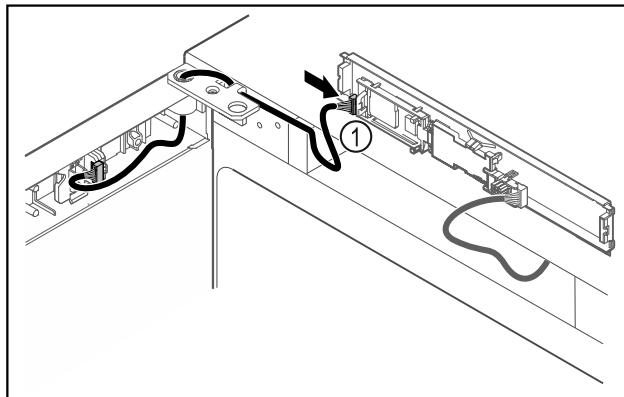


*Fig. 50*

- ▶ Enchufar el conector Fig. 50 (1) en la platin.

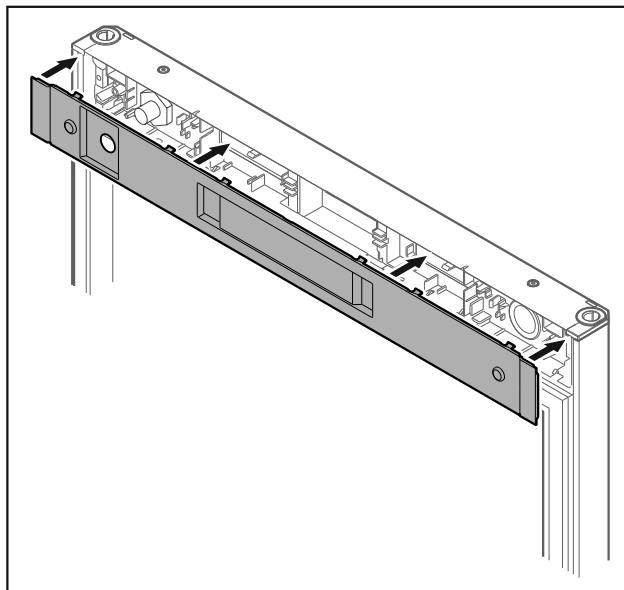

*Fig. 51*

- ▶ Colocar la cubierta.

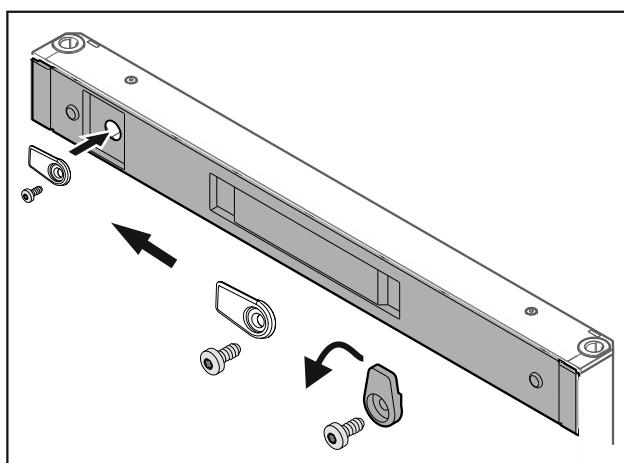

*Fig. 52*

- ▶ Atornillar el gancho de cierre.

# Puesta en marcha

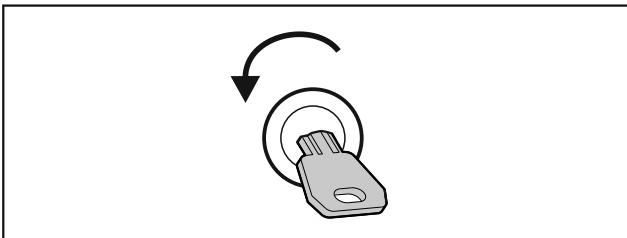


Fig. 53

- Abrir la puerta.

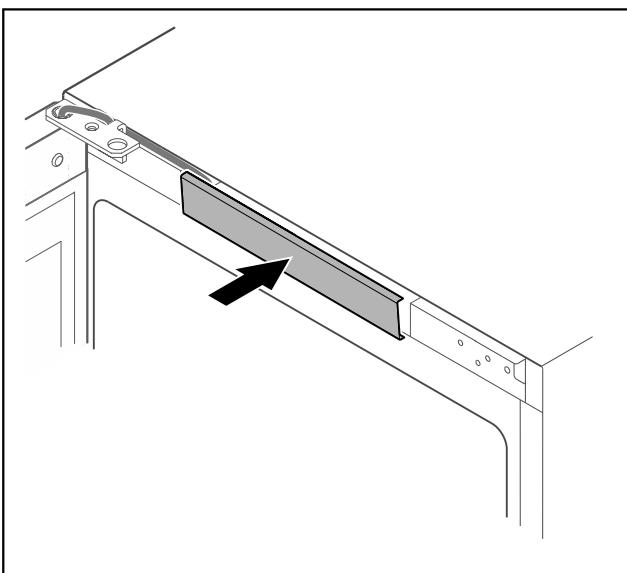


Fig. 54

- Encajar la cubierta central.

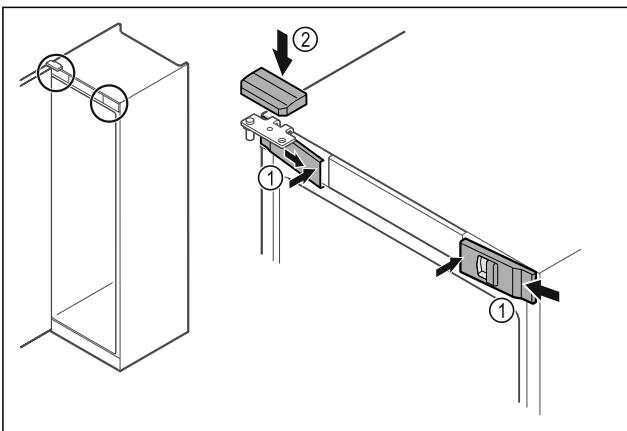


Fig. 55

- Enganchar las cubiertas delanteras Fig. 55 (1) lateralmente y encajar el interior.
- Encajar la cubierta superior Fig. 55 (2) desde arriba.
- Cerrar la puerta.
- La bisagra de la puerta se ha cambiado.

## 4.14 Alineación de la puerta

Si la puerta no está recta, puede ajustarla en la escuadra de bisagra inferior.

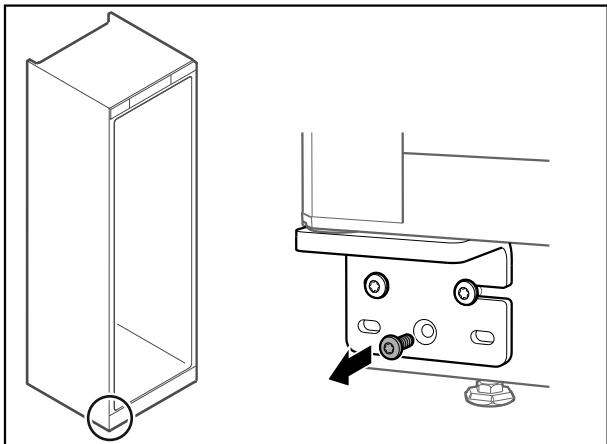


Fig. 56

- Retirar el tornillo central de la escuadra de bisagra inferior.

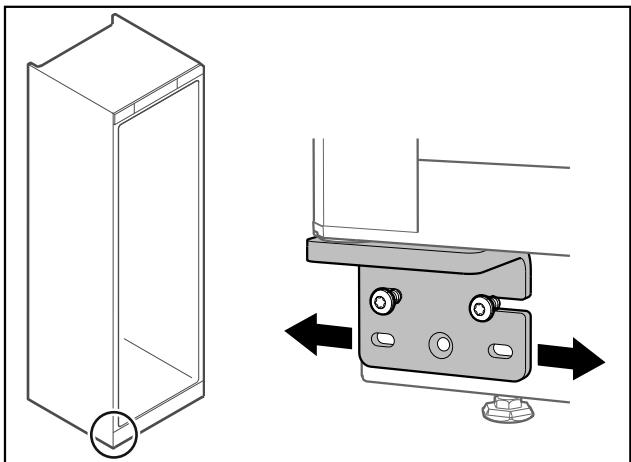


Fig. 57

- Soltar ligeramente los dos tornillos y desplazar la puerta con la escuadra de bisagra hacia la derecha o la izquierda.
- Apretar los tornillos hasta el tope (el tornillo central ya no se precisa).
- La puerta está alineada recta.

## 4.15 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico



### ADVERTENCIA

¡Peligro de descarga eléctrica y de sufrir lesiones por estar el electrodoméstico o el cable de alimentación eléctrica dañados!

Peligro de muerte y de lesiones por cortes. Si el electrodoméstico o el cable de alimentación eléctrica han sufrido daños durante el transporte, usted puede recibir una descarga eléctrica. Además, puede cortarse con piezas dañadas de la carcasa del electrodoméstico.

- Tras el transporte, comprobar que el electrodoméstico y el cable de alimentación eléctrica no presenten daños.
- No poner en ningún caso en funcionamiento el electrodoméstico si este o el cable de alimentación eléctrica presentan daños.
- Ponerse en contacto con el servicio al cliente.

Conecte el electrodoméstico al suministro eléctrico mediante el cable de alimentación suministrado por separado. El cable de alimentación tiene un conector para aparatos de frío en un extremo y un enchufe en el otro.

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- El equipo y el cable de alimentación no están dañados.
- El electrodoméstico se ha colocado correctamente. (consulte 4.5 Retirada de la protección para el transporte)
- Se han cumplido los requisitos de conexión eléctrica. (consulte 4.1 Condiciones de instalación)
- Se conocen y se cumplen las medidas para la conexión conforme a las especificaciones.
- La tensión y frecuencia de red se corresponden con las indicaciones de la placa de características.
- La caja de enchufe está debidamente conectada a tierra y protegida eléctricamente mediante fusible.
- La corriente de activación del fusible se sitúa entre 10 y 16 A.
- La toma de corriente es fácilmente accesible y no está detrás del electrodoméstico.

## AVISO

¡Peligro de daños por funcionamiento indebido!

Daños en los componentes eléctricos del electrodoméstico.

- Utilizar únicamente el cable de alimentación eléctrica suministrado.




## ADVERTENCIA

¡Peligro de incendio por conexión indebida!

Quemaduras.

Daños en el electrodoméstico.

- No utilice ningún cable prolongador.
- No utilice ninguna regleta de contactos.

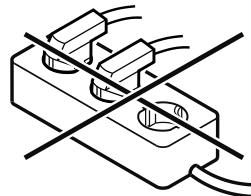

## AVISO

¡Peligro de daños por conexión indebida!

Daños en el electrodoméstico.


- No conecte el aparato a inversores para sistemas aislados como instalaciones solares o generadores de gasolina.

- Conectar la clavija del cable conector a la red a la alimentación de tensión eléctrica. Prestar atención al asiento firme de la clavija en la toma de corriente.
- El símbolo de standby aparece en la pantalla.
- Si no sucede nada en 60 segundos: El símbolo de reposo empalidece o desaparece.
- El electrodoméstico está conectado. Para la primera puesta en marcha, véanse las instrucciones de uso.

## 4.16 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio)

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- El electrodoméstico está instalado y conectado.
- Se han retirado del electrodoméstico todas las cintas adhesivas, láminas protectoras y adhesivas, así como las protecciones para el transporte.

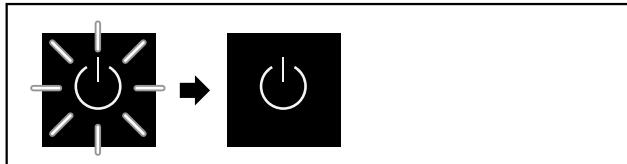


*Fig. 58 Representación a modo de ejemplo*

El símbolo de standby parpadea hasta que la operación de inicio finaliza.

La pantalla muestra el símbolo de standby.

Si el electrodoméstico se suministra con el ajuste de fábrica, es necesario seleccionar primero el idioma de la pantalla en la puesta en servicio.

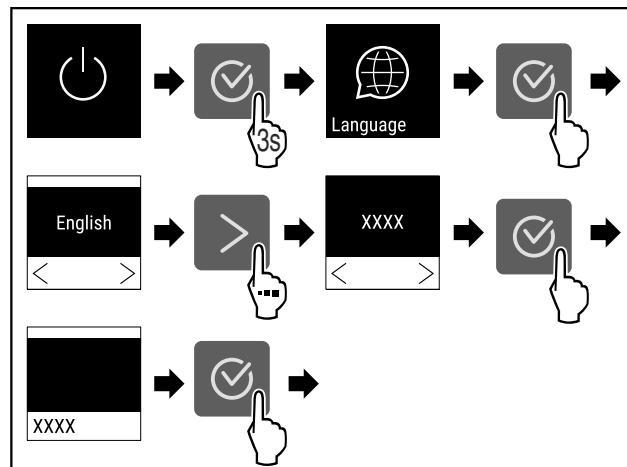

*Fig. 59*

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.




*Fig. 60*


- El electrodoméstico está encendido en cuanto se muestra la temperatura en la pantalla.
- El indicador de temperatura parpadea hasta que se alcanza la temperatura establecida.

## 5 Conservación

### 5.1 Notas sobre la conservación

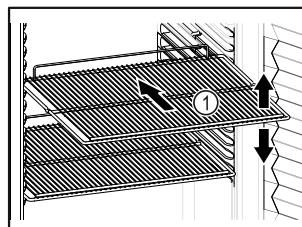

*Fig. 61 Representación a modo de ejemplo*

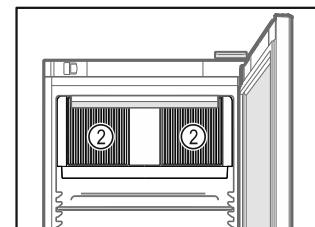

*Fig. 62*

Tener en cuenta lo siguiente a la hora de almacenar los alimentos:

- ❑ Si los estantes de rejilla Fig. 61 (1) se pueden colocar en distintas posiciones, ajustarlos en altura.
- ❑ Tener en cuenta la carga máxima. (consulte 9.1 Datos técnicos)
- ❑ Cargar el electrodoméstico en cuanto se alcance la temperatura de conservación (conservación de la cadena de frío).
- ❑ No obstruir la ranura de ventilación Fig. 62 (2) del ventilador de recirculación de aire del interior.
- ❑ El producto refrigerado no debe tocar la pared posterior.
- ❑ Los productos refrigerados no sobresalen de los estantes.
- ❑ Guardar los líquidos en recipientes cerrados.

# Uso

- Distanciar los productos refrigerados para que el aire pueda circular bien.
- No se pueden colocar productos por encima de la marca de apilado.   
Esto es importante para que se dé una correcta circulación de aire y una distribución uniforme de la temperatura en todo el interior.

## 6 Uso

### 6.1 Controles y elementos de indicación

La pantalla ofrece una visión general rápida sobre el estado actual del electrodoméstico, el ajuste de temperatura, el estado de las funciones y los ajustes, así como los mensajes de alarma y fallo.

El manejo se efectúa con flechas de navegación y el símbolo de confirmación.

Se pueden activar o desactivar funciones y modificar valores de ajuste.

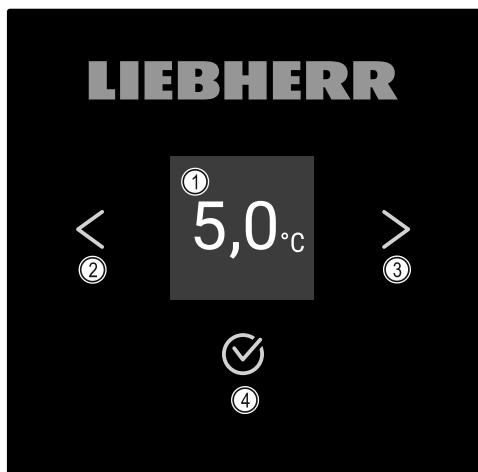


Fig. 63 Pantalla

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| (1) Indicación de estado       | (3) Flecha de navegación adelante |
| (2) Flecha de navegación atrás | (4) Confirmar                     |

#### 6.1.1 Indicación de estado




Fig. 64 Indicación de estado con temperatura real

La indicación de estado muestra la temperatura real y es la indicación inicial. Desde allí, se navega a las funciones y ajustes. La indicación de estado puede representar varios símbolos de indicación.

#### 6.1.2 Símbolos de indicación

Los símbolos de indicación facilitan información sobre el estado actual del electrodoméstico.

Símbolo	Estado del electrodoméstico
	<b>Standby</b> El electrodoméstico está apagado.

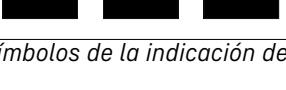Símbolo	Estado del electrodoméstico
	<b>Símbolo parpadeante de standby</b> El electrodoméstico se está iniciando.
	<b>Temperatura parpadeante</b> Todavía no se ha alcanzado la temperatura deseada. El electrodoméstico refrigerará a la temperatura ajustada.
	<b>Indicación de temperatura</b> Indica la temperatura actual del interior
	<b>Indicación alternante de temperatura/símbolo de descongelación con barra blanca</b> El electrodoméstico se encuentra en descongelación manual.
	<b>D en el indicador</b> El electrodoméstico está en DemoMode.
	<b>Recordatorio de mantenimiento</b> El intervalo de tiempo ajustado ha finalizado.
	<b>Memoria de datos llena</b> La memoria de datos (999 horas) está llena. A partir de este momento se sobrescriben los datos más antiguos.
	<b>Símbolo parpadeante</b> Todavía hay un fallo activo.
	<b>Símbolo de error</b> El electrodoméstico se encuentra en estado de fallo.
	<b>Barra blanca abajo</b> Submenú
	<b>Barra blanca arriba</b> Preajuste, ajuste activo o valor activo
	<b>Barra creciente</b> Pulsar 3 segundos el botón para activar el ajuste.
	<b>Barra decreciente</b> Pulsar 3 segundos el botón para desactivar el ajuste.

Símbolos de la indicación de estado

### 6.1.3 Señales acústicas

En los casos siguientes se emite una señal:

- Cuando se confirma una función o un valor.
- Cuando no se puede activar o desactivar una función o un valor.
- En cuanto se produce un fallo.
- En caso de mensaje de alarma.

Los tonos de alarma se encienden y apagan en el menú del cliente.

## 6.2 Funciones del electrodoméstico

### 6.2.1 Indicaciones sobre las funciones del electrodoméstico

Las funciones del electrodoméstico están configuradas de fábrica para que este funcione correctamente.

Antes de modificar, activar o desactivar las funciones del electrodoméstico, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- Ha leído y comprendido las descripciones sobre el funcionamiento de la pantalla. (consulte 3 Funcionamiento de la pantalla Touch)
- Se ha familiarizado con los elementos de control e indicación de su electrodoméstico. (consulte 6.1 Controles y elementos de indicación)

### 6.2.2 Encendido y apagado del electrodoméstico



Este ajuste permite encender y apagar el electrodoméstico completo.

#### Encendido del electrodoméstico

Con el DemoMode activado:

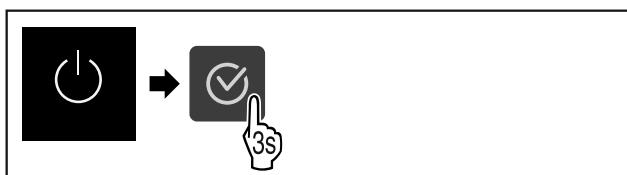


Fig. 65

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.

Con el DemoMode activado:

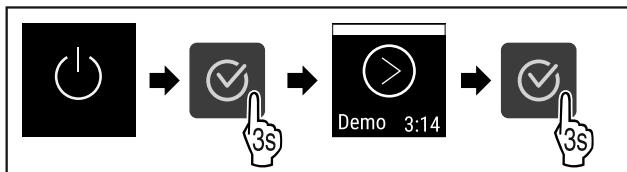


Fig. 66

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.

#### Nota

Desactivar el DemoMode antes de que finalice la cuenta atrás.

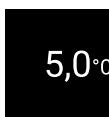


Fig. 67

- La indicación de temperatura aparece en la pantalla.

### Apagado del electrodoméstico



Fig. 68

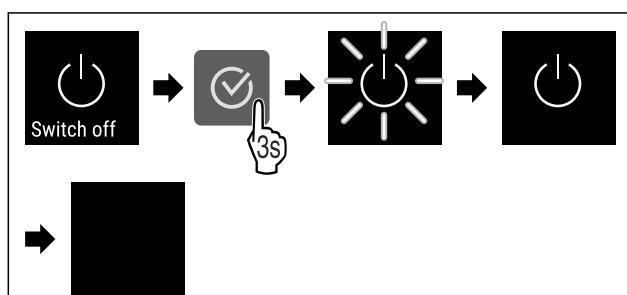


Fig. 69

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La pantalla muestra el símbolo de standby.
- La pantalla se apaga pasados aproximadamente 10 minutos.



### 6.2.3 Temperatura

Temp.

La temperatura depende de los siguientes factores:

- La frecuencia con la que se abre la puerta
- La duración de la apertura de la puerta
- La temperatura ambiente del lugar de instalación
- El tipo, la temperatura y la cantidad de productos refrigerados

#### Nota

En algunas zonas del interior, la temperatura del aire puede variar de la indicación de temperatura.

#### Ajuste de la temperatura



Fig. 70

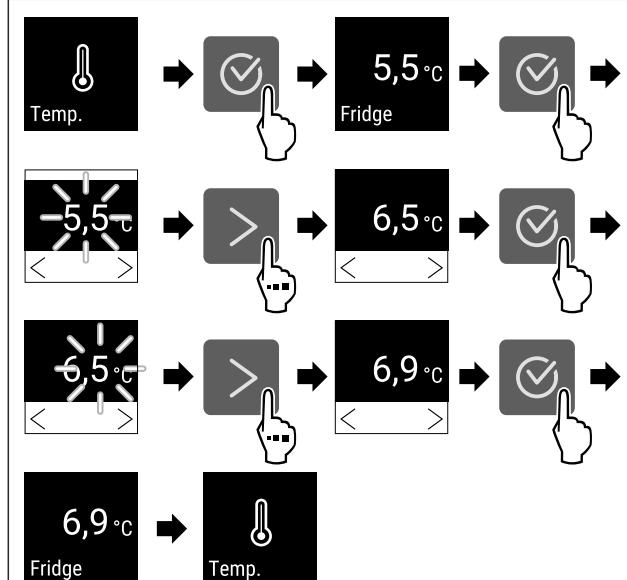


Fig. 71 Cambio de temperatura de 5,5 °C a 6,9 °C

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.

# Uso

- La temperatura está ajustada.



## 6.2.4 Registro de temperatura

El electrodoméstico indica las temperaturas mínima y máxima del interior. El registro de las mismas comienza automáticamente en cuanto se enciende el electrodoméstico y tiene lugar a intervalos de un minuto. Transcurridas 999 horas (aproximadamente 40 días) se emite una nota indicando que la memoria de datos está llena. En ese momento se habrá de restablecer el registro de temperatura.

### Nota

Se recomienda restablecer el registro de temperatura en la puesta en servicio del electrodoméstico **una vez alcanzada la temperatura ajustada**. De este modo, el valor de temperatura máxima indicado resulta concluyente.

### Visualización del registro de temperatura

El registro de temperatura indica el periodo de registro y las temperaturas mínimas y máximas medidas en este tiempo.

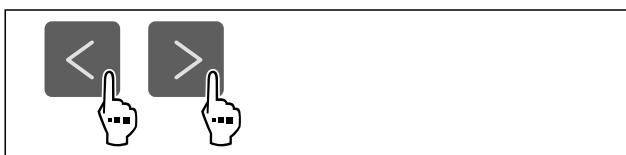


Fig. 72



Fig. 73

- Se muestra la pantalla de estado con los registros de temperatura.

### Restablecimiento del registro de temperatura

Las temperaturas mínimas y máximas indicadas se pueden restablecer en cualquier momento. Al hacerlo, se borran los valores mostrados y vuelve a comenzar el intervalo de registro.

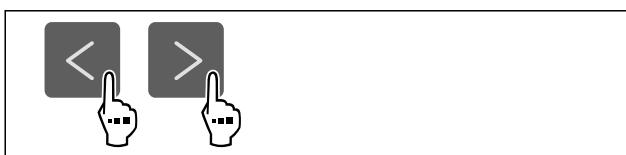


Fig. 74

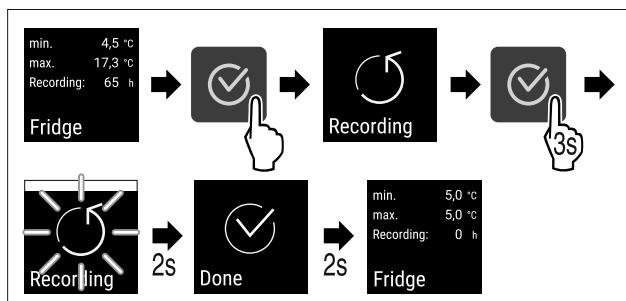


Fig. 75

- Ejecutar los pasos según se indica en la figura.  
► Se ha restablecido el registro de temperatura.  
► El intervalo de registro comienza de nuevo.



## 6.2.5 Iluminación \*

El electrodoméstico dispone de iluminación interior.

Puede encender la iluminación interior de forma permanente. (consulte Encendido de la iluminación\*) \*

Al abrir la puerta del electrodoméstico, la iluminación interior se enciende.

### Apagado de la iluminación\*



Fig. 76

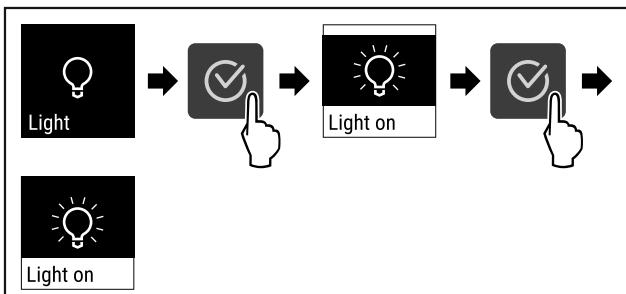


Fig. 77

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.  
► La iluminación está apagada.

### Encendido de la iluminación\*



Fig. 78

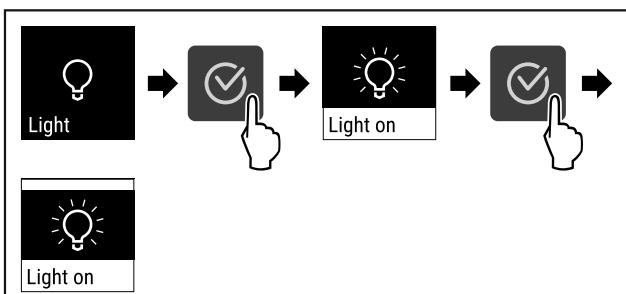


Fig. 79

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.  
► La iluminación está encendida.

## 6.2.6 Protección de acceso al menú de ajuste



Con este ajuste se protege el acceso al menú de ajuste a través de un código PIN de tres caracteres.

### Aplicación:

- Evitar cambios no intencionados en los ajustes y funciones.
- Evitar una desconexión no intencionada del electrodoméstico.
- Evitar ajustes involuntarios de la temperatura.

**Nota**

- En los siguientes ejemplos, se utiliza el código PIN: **1 1 1** ajustado de fábrica.

**Activación de la protección de acceso al menú de ajuste**

Fig. 80

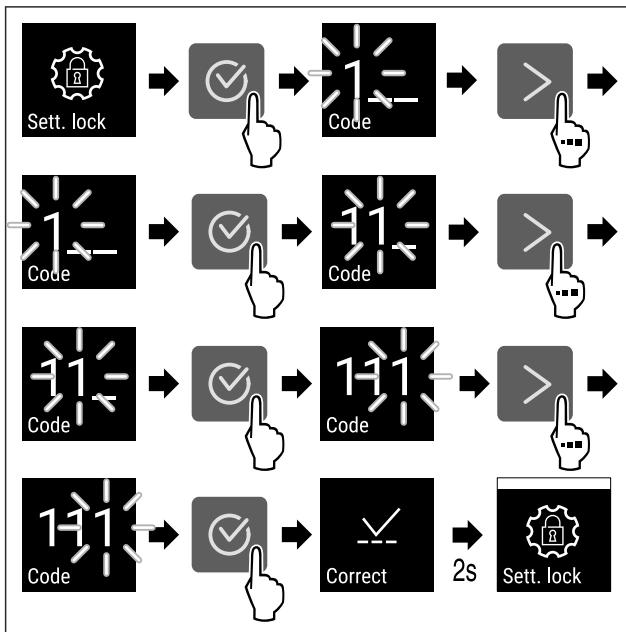


Fig. 81

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La protección de acceso al menú de ajuste está activada.

**Modificación del código PIN de la protección de acceso al menú de ajuste**

Véase: (consulte 6.2.7 Códigos de acceso)

**Desactivación de la protección de acceso al menú de ajuste**

Fig. 82

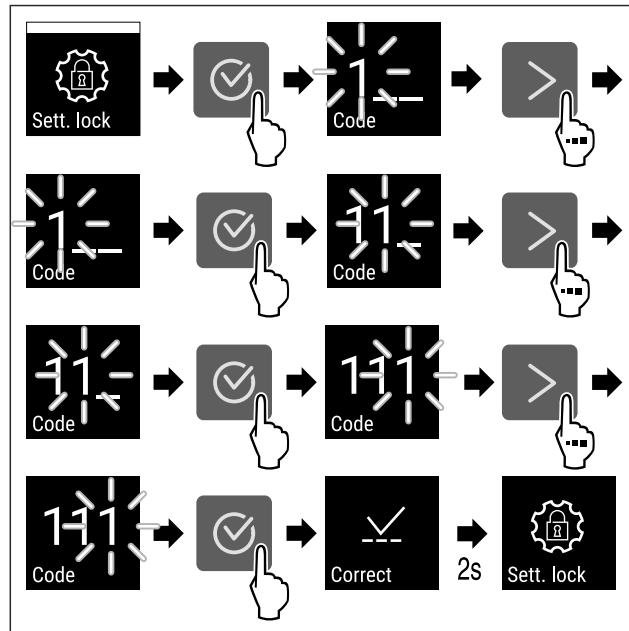


Fig. 83

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La protección de acceso al menú de ajuste está desactivada.

**Apertura del menú de ajuste protegido**

Si la protección de acceso está activada, es necesario introducir el código PIN para abrir el menú de ajuste. Al salir del menú de ajuste, la protección de acceso se activa automáticamente.

- Pulsar repetidamente la flecha de navegación hasta que aparezca la función correspondiente.

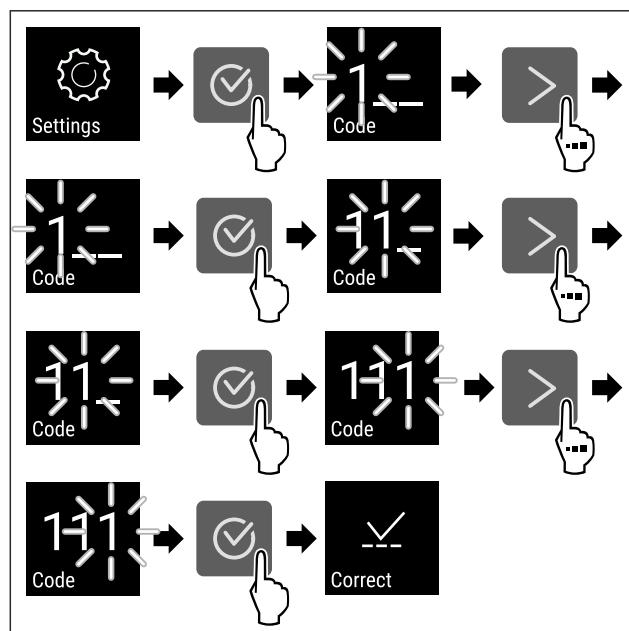


Fig. 84

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El código PIN es correcto.
- Se abre el menú de ajuste.

**6.2.7 Códigos de acceso**

Se pueden efectuar varios ajustes.

Aplicación:

- Cambio del código de ajuste.
- Restablecimiento del código de ajuste.

## Protección de acceso al menú de ajuste



### Cambio del código de ajuste

Este ajuste permite cambiar el código de ajuste para la protección de acceso al menú de ajuste.

El ajuste se efectúa en 3 pasos:

- Introducción del código de ajuste antiguo
- Introducción del código de ajuste nuevo
- Confirmación del código de ajuste nuevo

#### Nota

- En el ejemplo siguiente se cambia el código de ajuste **1 1 1** preajustado de fábrica.
- El nuevo código de ajuste es: **2 3 4**

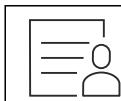


Fig. 85

**La protección de acceso al menú de ajuste debe estar activada.** (consulte 6.2.6 Protección de acceso al menú de ajuste )

- Pulsar repetidamente la flecha de navegación hasta que aparezca la función correspondiente.

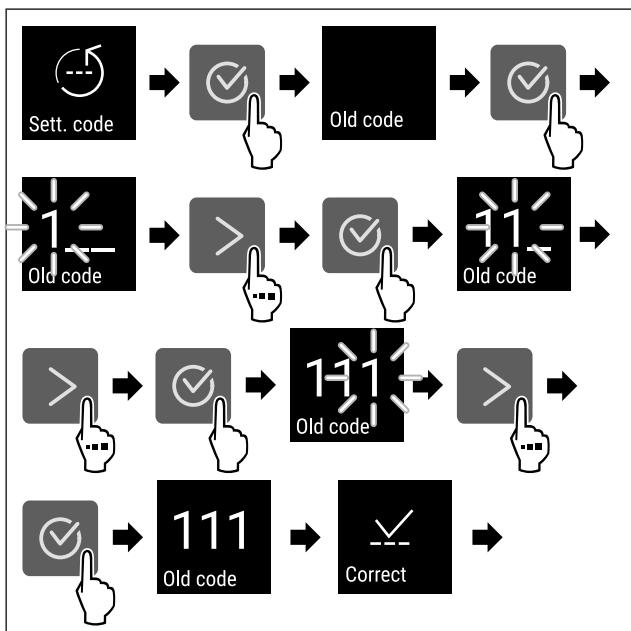


Fig. 86

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El código de ajuste antiguo se ha introducido correctamente.

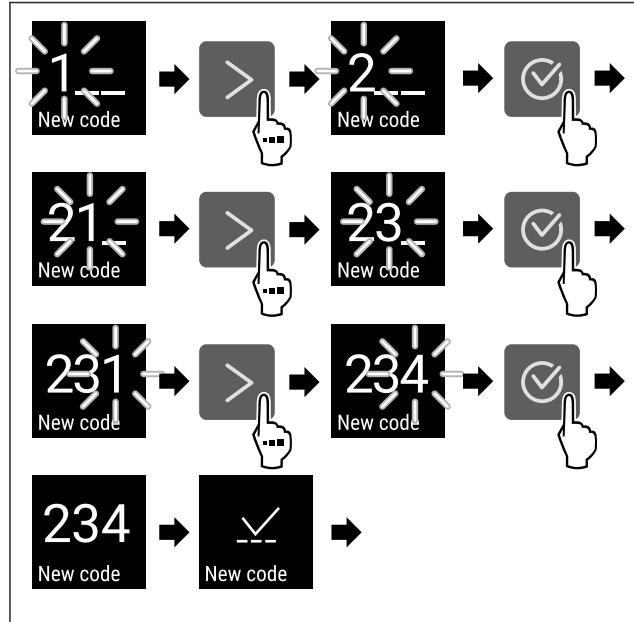


Fig. 87

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El código de ajuste nuevo se ha introducido correctamente.

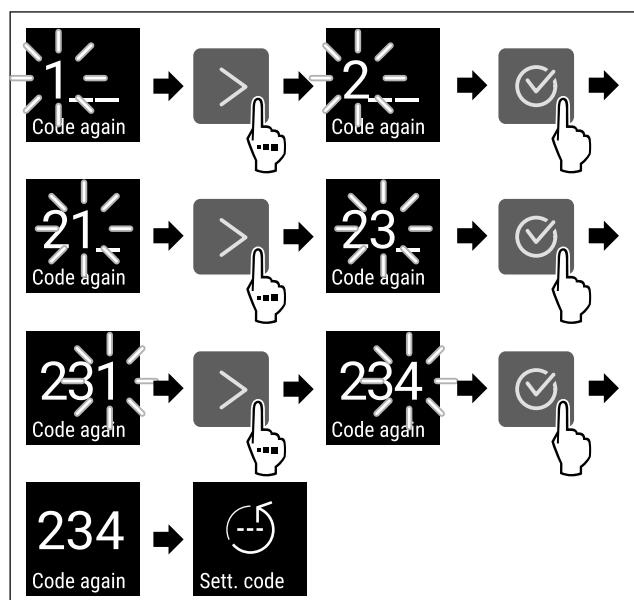


Fig. 88

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El código de ajuste nuevo se ha confirmado correctamente.
- El código de ajuste se ha cambiado.

### Restablecimiento del código de ajuste

Se ha olvidado o se desconoce el código de ajuste para la protección de acceso al menú de ajuste.

- Restablecer el electrodoméstico a los ajustes de fábrica (consulte 6.2.27 Restablecer a los valores de fábrica ).
- El electrodoméstico se ha restablecido a los ajustes originales.
- El código de ajuste de fábrica es: **1 1 1**

## 6.2.8 Recordatorio de intervalo de mantenimiento



Ajuste del periodo de tiempo hasta que se produzca el recordatorio de mantenimiento.

Se pueden ajustar los valores siguientes:

- 7 días
- 14 días
- 30 días
- 60 días
- 90 días
- 180 días
- 360 días
- 720 días
- 1080 días
- OFF

### Ajuste del recordatorio de intervalo de mantenimiento

A continuación se indican los pasos para ajustar el espacio de tiempo hasta el mantenimiento.



Fig. 89

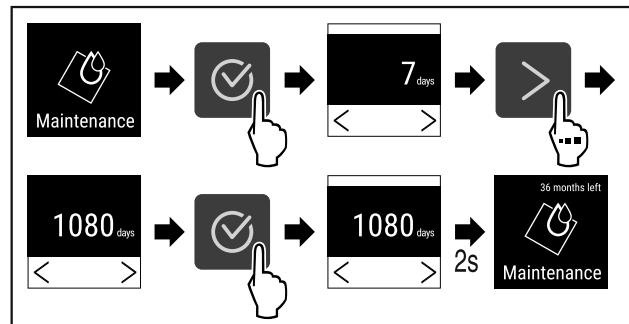


Fig. 90

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Se ha ajustado el espacio de tiempo hasta que se produzca el recordatorio de mantenimiento.
- Se muestra el tiempo que queda.

## 6.2.9 Idioma



Con este ajuste se selecciona el idioma de visualización.

### Ajuste del idioma



Fig. 91

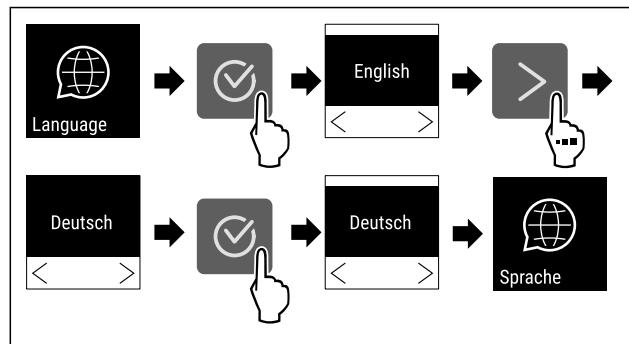


Fig. 92

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Se ha ajustado el idioma seleccionado.

## 6.2.10 Unidad de temperatura



Con esta función se ajusta la unidad de temperatura. Puede ajustar la unidad de temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.

### Ajustar unidad de temperatura



Fig. 93

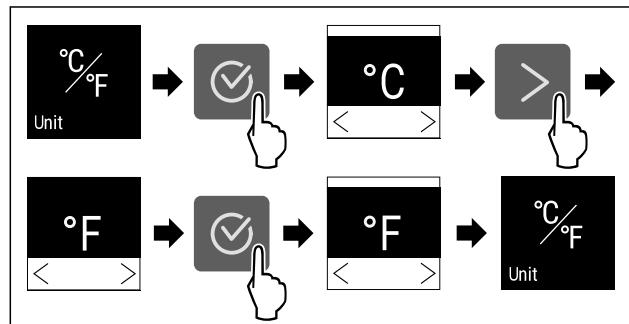


Fig. 94 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de grados Celsius a Fahrenheit.

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La unidad de temperatura está ajustada.

## 6.2.11 Brillo de pantalla



Con esta función se ajusta gradualmente el brillo de la pantalla.

Puede ajustar los siguientes niveles de brillo:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (preajuste)

### Ajustar brillo

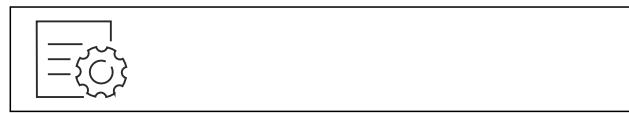


Fig. 95

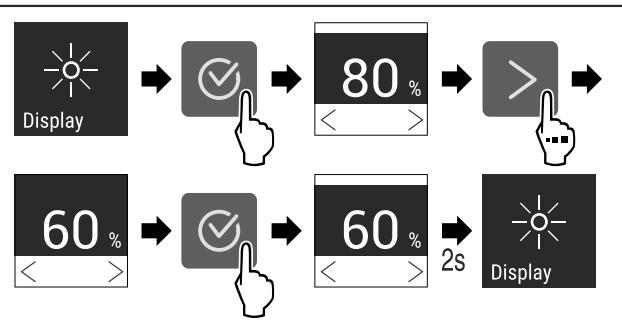


Fig. 96 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de 80 % a 60 %.

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El brillo está ajustado.



## 6.2.12 Alarm Sound

Esta función permite encender y apagar todos los tonos de alarma, p. ej., la alarma de la puerta.

### Activación de Alarm Sound



Fig. 97

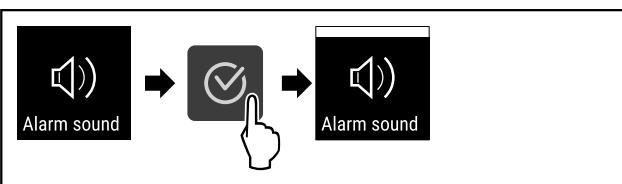


Fig. 98

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Alarm Sound está activado.

### Desactivación de Alarm Sound



Fig. 99

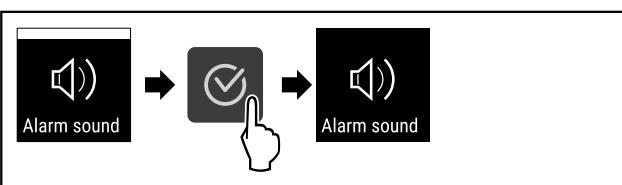


Fig. 100

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Alarm Sound está desactivado.



## 6.2.13 Key Sound

Con esta función se pueden activar y desactivar todos los tonos de confirmación y el Startsound.

### Activación de Key Sound

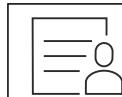


Fig. 101

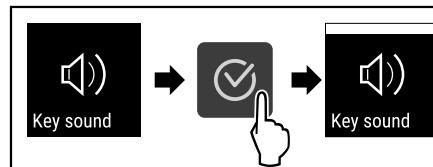


Fig. 102

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Key Sound está activado.

### Desactivación de Key Sound

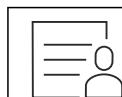


Fig. 103

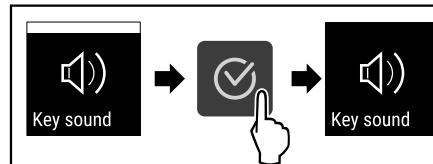


Fig. 104

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Key Sound está desactivado.



## 6.2.14 Conexión WiFi

### Nota

Liebherr SmartMonitoring Dashboard no está disponible en todos los países. Compruebe la disponibilidad mediante el código QR introduciendo su modelo.

### Nota

Para usar el Liebherr SmartMonitoring Dashboard en <https://smartmonitoring.liebherr.com> es necesario tener un SmartModule instalado y una cuenta MyLiebherr comercial. Durante la puesta en servicio en línea, puede iniciar sesión directamente con los datos de inicio de sesión disponibles o registrarse y crear una cuenta de empresa nueva.

Para realizar este ajuste, se requiere una conexión inalámbrica entre el electrodoméstico e internet. La conexión se controla mediante el SmartModule. El electrodoméstico se puede vincular con el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) desde el navegador, y se pueden usar opciones avanzadas y posibilidades individuales de control, administración y monitorización.

### Nota

Puede obtener accesorios a través del servicio al cliente (consulte 9.3 Servicio al cliente) y en la tienda Liebherr-Hausgeräte, en [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

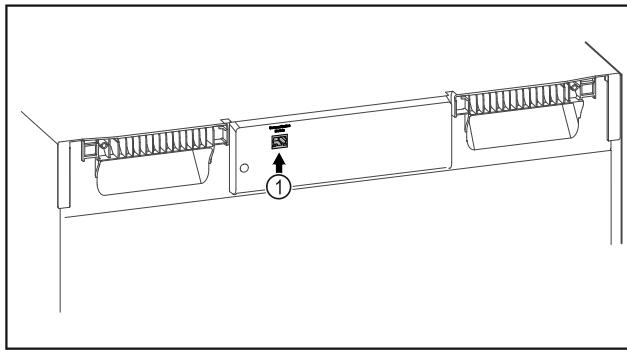


Fig. 105

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- El SmartModule Fig. 105 (1) está colocado.

#### Establecimiento de la conexión

Realizar en línea la puesta en servicio y la configuración del SmartModule desde el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) en un terminal con conexión a internet.

En el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) encontrará información para el montaje posterior del SmartModule.



Fig. 106

- Abrir el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (consulte Fig. 106).

En el frigorífico o congelador:



Fig. 107

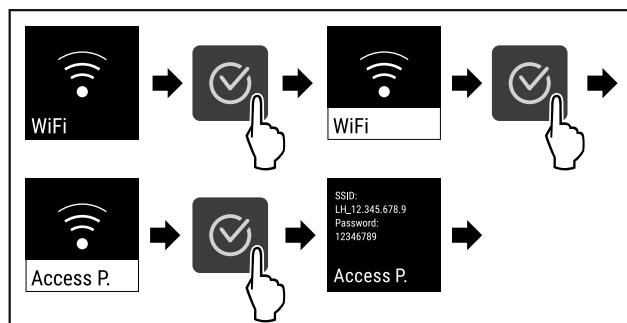


Fig. 108

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Continuar el proceso de configuración en un terminal con conexión a internet: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)

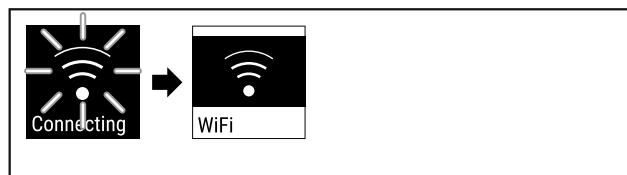


Fig. 109

- Se está estableciendo la conexión.
- Aparece WiFi connecting. El símbolo parpadea.
- Seguir las instrucciones del [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- Se ha establecido la conexión.

#### Interrupción de la conexión



Fig. 110

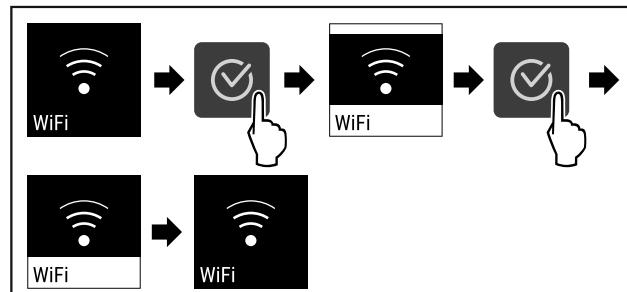


Fig. 111

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Se ha interrumpido la conexión.

#### Restablecimiento de la conexión



Fig. 112

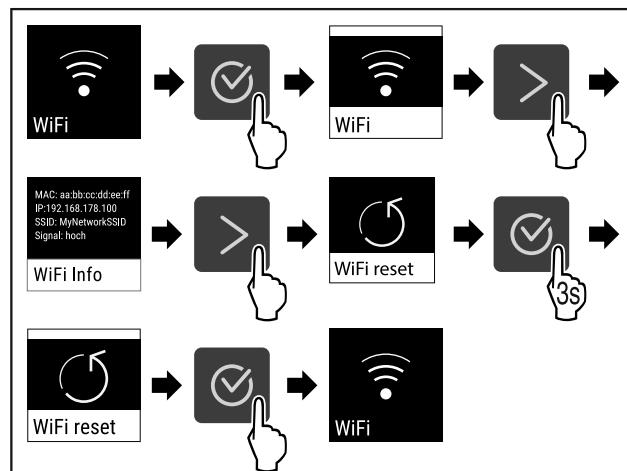


Fig. 113

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Los ajustes de la WiFi se han restablecido al estado de suministro.



#### 6.2.15 Conexión LAN

LAN

##### Nota

Liebherr SmartMonitoring Dashboard no está disponible en todos los países. Compruebe la disponibilidad mediante el código QR introduciendo su modelo.

##### Nota

Para usar el Liebherr SmartMonitoring Dashboard en <https://smartmonitoring.liebherr.com> es necesario tener un SmartModule instalado y una cuenta MyLiebherr comercial. Durante la puesta en servicio en línea, puede iniciar sesión directamente con los datos de inicio de sesión disponibles o registrarse y crear una cuenta de empresa nueva.

Para realizar este ajuste se requiere una conexión con cable entre el electrodoméstico e internet. La conexión se

# Uso

controla mediante el SmartModule. El electrodoméstico se puede vincular con el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) desde el navegador, y se pueden usar opciones avanzadas y posibilidades individuales de control, administración y monitorización.

## Nota

Puede obtener accesorios a través del servicio al cliente (consulte 9.3 Servicio al cliente) y en la tienda Liebherr-Hausgeräte, en [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

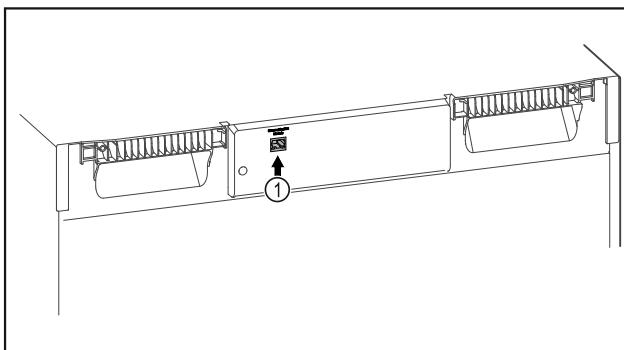


Fig. 114

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- El SmartModule Fig. 114 (1) está colocado.
- Hay un cable de red conectado.
- La red está conectada a Internet.

## Establecimiento de la conexión

Realizar en línea la puesta en servicio y la configuración del SmartModule desde el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) en un terminal con conexión a internet.

En el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) encontrará información para el montaje posterior del SmartModule.



Fig. 115

- Abrir el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (consulte Fig. 115).

En el frigorífico o congelador:



Fig. 116

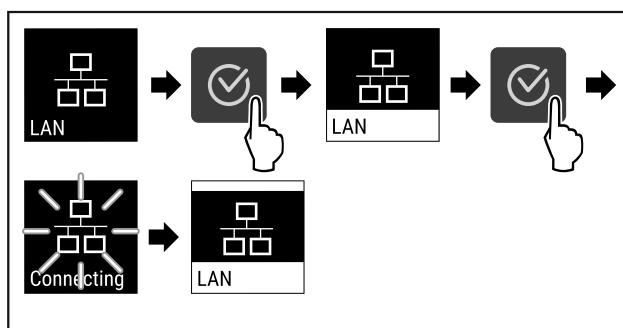


Fig. 117

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.

- Se está estableciendo la conexión: Aparece LAN connecting. El símbolo parpadea.
- Seguir las instrucciones del [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- Se ha establecido la conexión.

## Interrupción de la conexión



Fig. 118

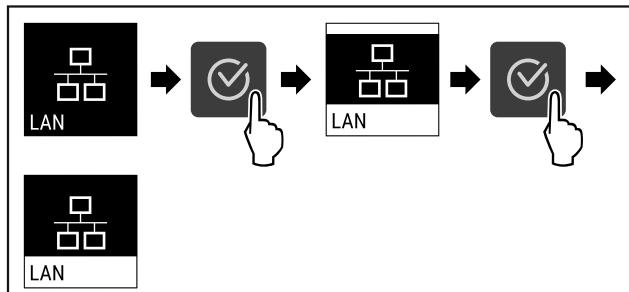


Fig. 119

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Se ha interrumpido la conexión.

## 6.2.16 Información sobre el electrodoméstico



Info

Con esta función se muestra el nombre del modelo, el índice, el número de serie y el número de servicio de su electrodoméstico. Necesitará la información sobre el electrodoméstico cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 9.3 Servicio al cliente)

Con esta función, también abrirá un menú ampliado. (consulte 3 Funcionamiento de la pantalla Touch)

## Mostrar información sobre el electrodoméstico

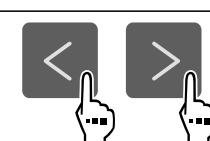


Fig. 120



Info

Fig. 121

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La pantalla muestra la información sobre el electrodoméstico.



## 6.2.17 Horas de funcionamiento

Esta indicación muestra las horas de funcionamiento del electrodoméstico.

## Indicación de las horas de funcionamiento

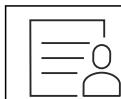


Fig. 122

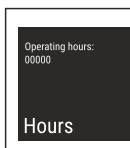


Fig. 123

- Aparecen las horas de funcionamiento.

## 6.2.18 Software Software

Con esta función se muestra la versión del software de su electrodoméstico.

### Mostrar versión del software



Fig. 124



Fig. 125

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La pantalla muestra la versión del software.



## 6.2.19 Descongelación Defrost

El electrodoméstico se descongela automáticamente durante el funcionamiento normal.

### Aplicación:

- Si hay mucha escarcha en el interior, la función de descongelación automática puede iniciarse manualmente.

### Inicio manual de la descongelación automática



Fig. 126

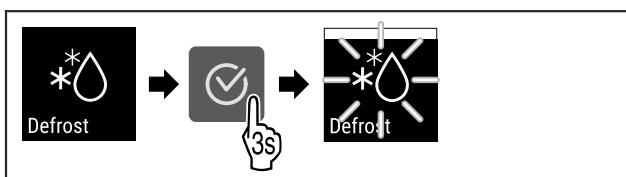


Fig. 127

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La descongelación automática ha iniciado. Una vez finalizada la descongelación, el electrodoméstico vuelve automáticamente al funcionamiento normal.

### Nota

Si sigue habiendo hielo en el interior después de iniciar varias veces la función de descongelación automática, descongele el electrodoméstico manualmente. (consulte 8.2 Descongelación del electrodoméstico)

### Interrupción de la descongelación iniciada manualmente

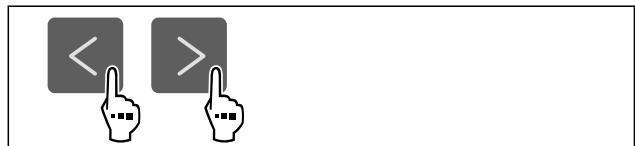


Fig. 128

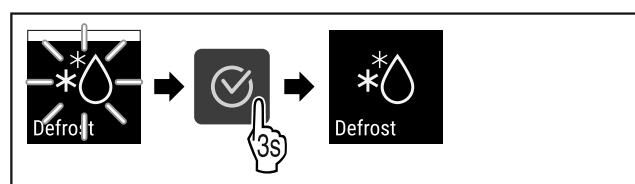


Fig. 129

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La descongelación iniciada manualmente se ha interrumpido. El electrodoméstico vuelve automáticamente al funcionamiento normal.



### Información de descongelación Defrost info

Este ajuste se utiliza para ajustar el indicador durante un proceso de descongelación automática.

Visua- liza- ción	Descripción	
<b>Def 1</b>	La indicador de temperatura no se actualiza. Muestra la última temperatura antes de que se inicie el proceso de descongelación automática.	
<b>Def 2</b>	El símbolo del "proceso de descongelación automática" se muestra en el indicador de estado. El indicador de temperatura se actualiza continuamente y muestra la temperatura real.	
<b>Def 3</b>	Con versión de software PW SW inferior a <b>TOD 8-800</b> :	La indicador de temperatura no se actualiza. Muestra la última temperatura antes de que se inicie el proceso de descongelación automática.
	Con versión de software PW SW igual o superior a <b>TOD 8-800</b> :	El indicador de temperatura se actualiza continuamente y muestra la temperatura real.
<b>Def 4</b>	Con versión de software PW SW inferior a <b>TOD 8-800</b> :	La indicador de temperatura no se actualiza. Muestra la última temperatura antes de que se inicie el proceso de descongelación automática.
	Con versión de software PW SW igual o superior a <b>TOD 8-800</b> :	La observación del "proceso de descongelación automática" se muestra en el indicador de estado. La indicador de temperatura no se actualiza. Muestra la última temperatura antes de que se inicie el proceso de descongelación automática.

## Defrosting

Presentación de la observación del "proceso de descongelación automática" en el indicador de estado



Aquí puede ver la versión de software instalada en su electrodoméstico PW SW: (consulte 6.2.18 Software )



Fig. 130

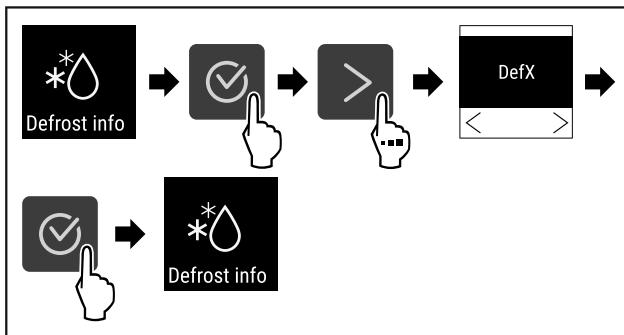


Fig. 131

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Se selecciona la variante de visualización deseada.



## 6.2.20 Calibración del sensor

Puede utilizar la calibración del sensor para igualar las diferencias entre la temperatura ajustada y la temperatura real. Para ello, determine la temperatura real con un aparato de medición calibrado.

Rango de ajuste: +/- 3 Kelvin en pasos de 0,1 Kelvin.

### Calibración del sensor

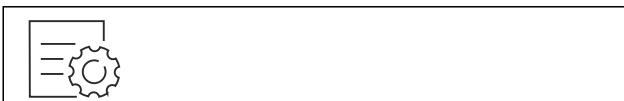


Fig. 132

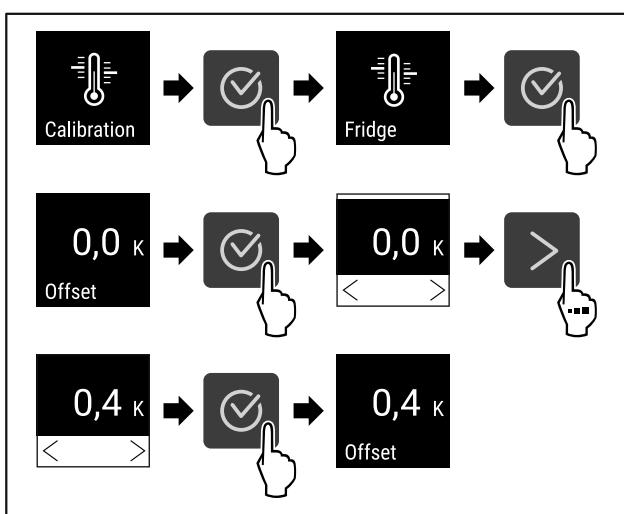


Fig. 133

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El sensor está calibrado.

## Nota

La temperatura calibrada se muestra en la pantalla en un plazo de dos horas.



## 6.2.21 Alarma de temperatura



Con esta función se ajusta la alarma de temperatura. Para ello, establezca los límites superior e inferior de temperatura con un valor diferencial respecto a la temperatura interior ajustada actualmente. La alarma de temperatura se activa en cuanto la temperatura interior sale del intervalo de temperatura ajustado y ha transcurrido cualquier tiempo de retardo establecido.

Ejemplo	Valor diferencial por ajustar
Temperatura interior actual	5 °C
Límite inferior de temperatura	2 °C
Límite superior de temperatura	+3 °C

Puede ajustar los siguientes valores:

- Valor diferencial para el límite inferior de temperatura en pasos de 0,1 °C
- Valor diferencial para el límite superior de temperatura en pasos de 0,1 °C
- Tiempo de retardo de la alarma de 0 a 60 minutos (el ajuste "0" significa que no hay retardo de la alarma de temperatura).
- La frecuencia de repetición de la alarma de 0 a 30 minutos tras la confirmación de la alarma (el ajuste "0" significa que no hay repetición de la alarma tras la confirmación de la alarma).

### Ajuste de la alarma de temperatura



Fig. 134

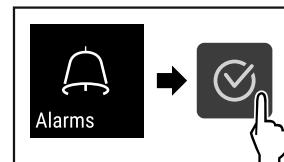


Fig. 135

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.

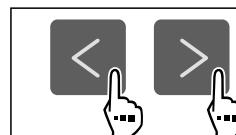


Fig. 136

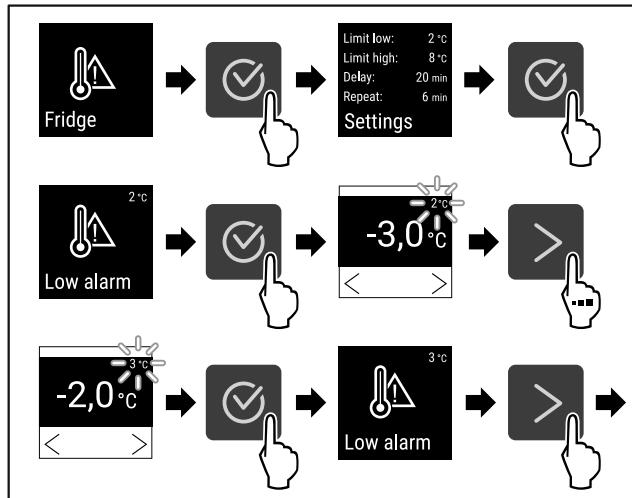


Fig. 137 Ejemplo de ajuste del límite inferior de temperatura basado en una temperatura de electrodoméstico ajustada de 5 °C.

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El límite inferior de temperatura está ajustado.

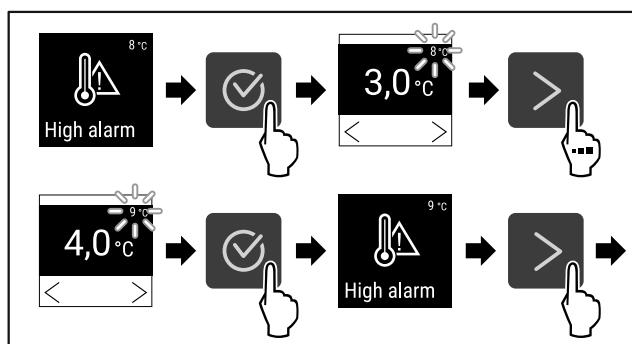


Fig. 138 Ejemplo de ajuste del límite inferior de temperatura basado en una temperatura de electrodoméstico ajustada de 5 °C.

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El límite superior de temperatura está ajustado.

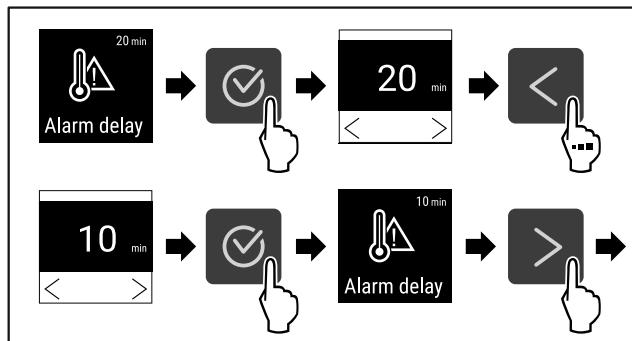


Fig. 139

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El tiempo de retardo de la alarma está ajustado.

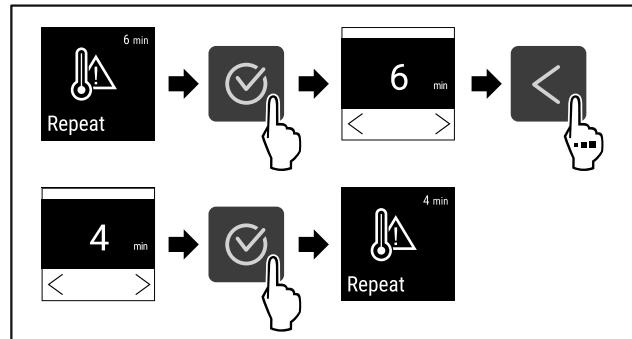


Fig. 140

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El intervalo de repetición de la alarma está ajustado.
- La alarma de temperatura está ajustada.

#### Visualización de los valores ajustados para alarma de temperatura



Fig. 141

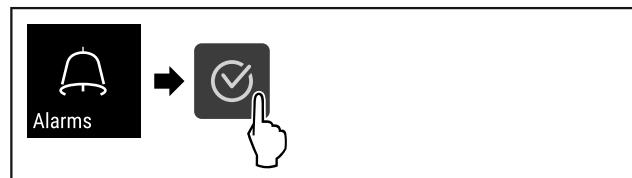


Fig. 142

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.



Fig. 143

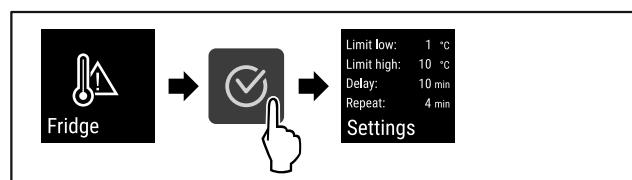


Fig. 144

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Se muestran los valores ajustados para la alarma de temperatura.



#### 6.2.22 Alarma de puerta

Con esta función puede activar o desactivar la alarma de puerta. La alarma de puerta sonará si la puerta está abierta durante demasiado tiempo. La alarma de puerta está activada a su entrega. Puede ajustar el tiempo en que la puerta puede estar abierta antes de que suene la alarma.

Puede ajustar los siguientes valores:

- 15 segundos
- 30 segundos
- 60 segundos
- 90 segundos
- 120 segundos

# Uso

- 150 segundos
- 180 segundos
- Desconectada

## Ajustar alarma de puerta

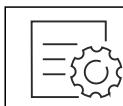


Fig. 145

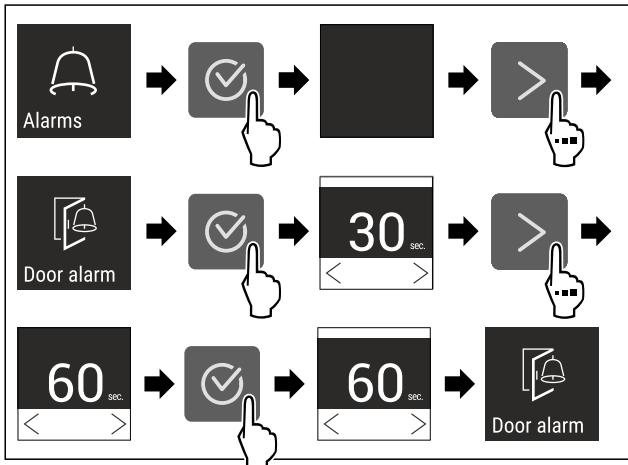


Fig. 147 Representación a modo de ejemplo: Cambiar alarma de puerta de 30 segundos a 60 segundos.

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La alarma de puerta está ajustada.

## Desactivar alarma de puerta

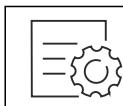


Fig. 148

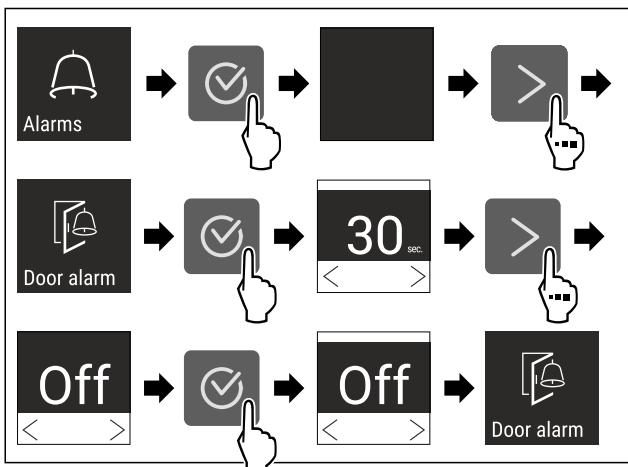


Fig. 149

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La alarma de puerta está desactivada.

## 6.2.23 Alarma de luz \*

Este ajuste permite resaltar adicionalmente los mensajes de alarma visuales en la pantalla mediante la iluminación parpadeante del electrodoméstico.

## Activación de la alarma de luz

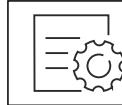


Fig. 150

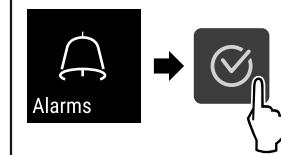


Fig. 151

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.

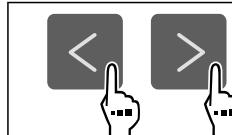


Fig. 152

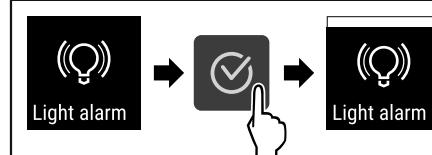


Fig. 153

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La alarma de luz está activada.

## Desactivación de la alarma de luz

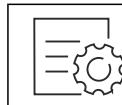


Fig. 154

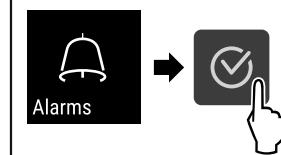


Fig. 155

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.

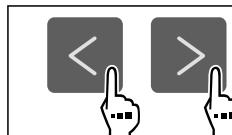


Fig. 156

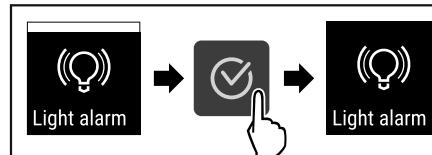


Fig. 157

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La alarma de luz está desactivada.

## 6.2.24 Simulación de alarma

Puede utilizar esta función para simular una alarma de temperatura en el equipo, p. ej., para comprobar que un dispositivo de seguridad se ha activado correctamente. El dispositivo de seguridad está conectado a la salida de alarma sin potencial. (consulte 7.3 Interfaces)

### Inicio de la simulación de alarma



Fig. 158

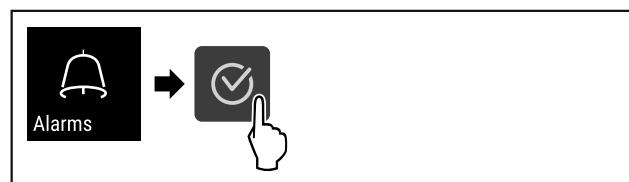


Fig. 159

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.

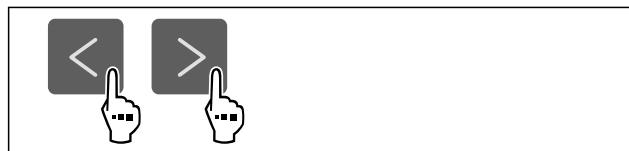


Fig. 160

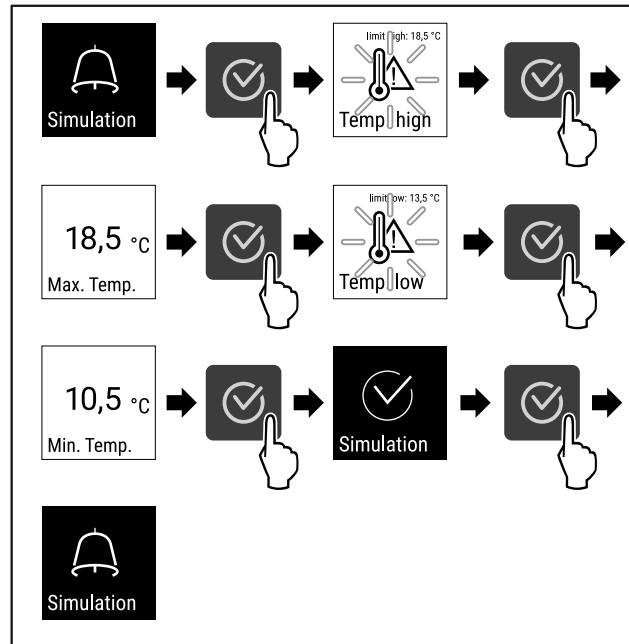


Fig. 161

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Se ha realizado la simulación.
- El dispositivo de seguridad conectado se debería haber activado.

## 6.2.25 Transmisión de alarma



Puede utilizar esta función para configurar la transmisión de una o varias alarmas a un receptor de alarmas externo. El receptor de alarmas se conecta a la salida de alarma sin potencial del aparato. (consulte 7.3 Interfaces)

Puede seleccionar los siguientes ajustes:

- Tipo de alarma:
  - Alarma de puerta
  - Alarma de temperatura
  - Alarma de la puerta y alarma de temperatura
  - Todos
- Confirmar:
  - **Sí:** La alarma se confirma en el aparato y en el receptor conectado externamente.
  - **No:** La alarma se confirma en el aparato y permanece activa en el receptor hasta que se haya subsanado la avería.
- Actualizar (solo visible si se selecciona "Sí" al confirmar):
  - **Sí:** la alarma se repite.

**Alarma de temperatura** en función del tiempo establecido (consulte 6.2.21 Alarma de temperatura )

(Si ajusta el tiempo de retardo de la alarma a "0" tampoco habrá repetición de alarma en el relé de alarma).

**Alarma de la puerta** tras 1 o 4 minutos\* (consulte 6.2.22 Alarma de puerta )

- **No:** Alarma confirmada permanentemente.

### Activación de la transmisión de alarma

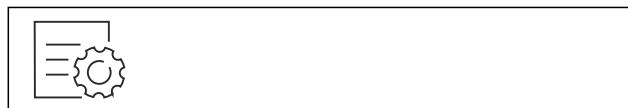


Fig. 162

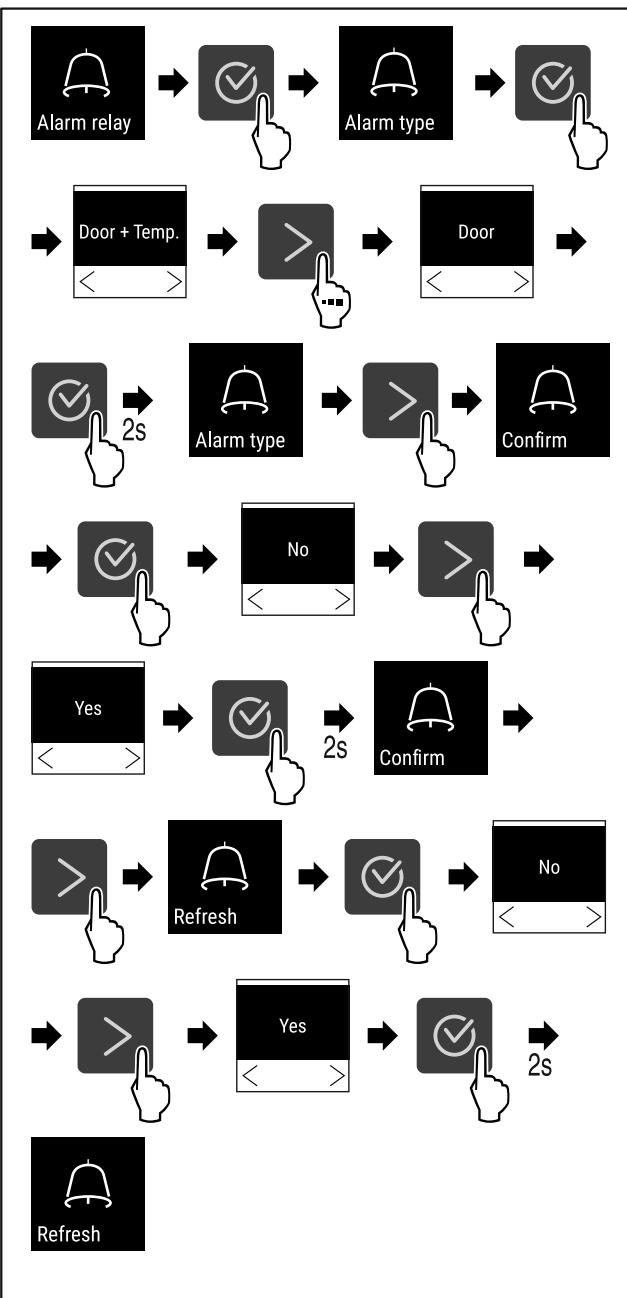


Fig. 163

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La transmisión de alarma está ajustada.

## 6.2.26 Modo de demostración



El modo de demostración es una función especial para los comercios que desean realizar una demostración de las funciones del dispositivo. Si activa el modo de demostración, todas las funciones técnicas de frío estarán desactivadas.

Si enciende el dispositivo y aparece una "D" en el indicador de estado, el modo de demostración ya está activado.

Si activa el modo de demostración y, a continuación, lo vuelve a desactivar, el dispositivo se restablecerá a los valores predeterminados de fábrica. (consulte 6.2.27 Restablecer a los valores de fábrica )

## Activar el modo de demostración

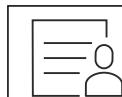


Fig. 164

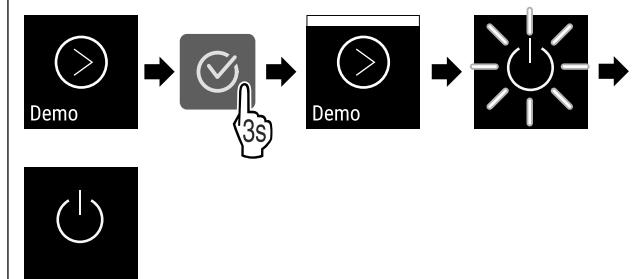


Fig. 165

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El modo de demostración está activado.
- El electrodoméstico está apagado.
- Encender el electrodoméstico. (consulte 4.16 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))
- En el indicador de estado aparece "D".

## Desactivar el modo de demostración



Fig. 166

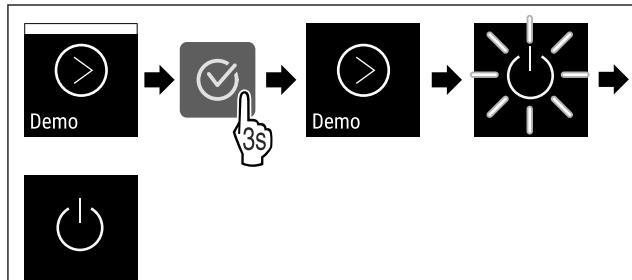


Fig. 167

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El modo de demostración está desactivado.
- El electrodoméstico está apagado.
- Encender el electrodoméstico. (consulte 4.16 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))
- El electrodoméstico se ha restablecido a los ajustes de fábrica.

## 6.2.27 Restablecer a los valores de



Utilizar esta función para restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Todos los ajustes que haya realizado hasta el momento se restablecerán a su ajuste original.

## Ejecutar el restablecimiento



Fig. 168

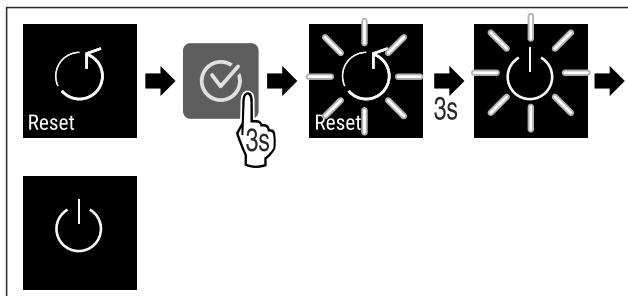


Fig. 169

► Siga los pasos de procedimiento según la figura.

- El electrodoméstico se ha restablecido.
- El electrodoméstico está apagado.
- Reiniciar el electrodoméstico. (consulte 4.16 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))





## 6.3 Mensajes



### 6.3.1 Advertencias

Las advertencias se indican de forma audible con una señal acústica y visualmente mediante un símbolo en la pantalla. La señal acústica aumenta en intensidad y volumen hasta que se confirma el mensaje.

Mensaje	Causa	Solución
 Door open	Este mensaje aparece si la puerta permanece abierta demasiado tiempo.	Cerrar la puerta. Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se desactiva. <b>Nota</b> Se puede ajustar el tiempo que transcurre hasta que aparece el mensaje (consulte 6.2.22 Alarma de puerta).
 Temperature	Este mensaje aparece si la temperatura no se corresponde con la temperatura ajustada. La causa de las diferencias de temperatura puede ser: - Se ha introducido un producto caliente. - Al reordenar y extraer productos, circula aire ambiente demasiado caliente. - Fallo prolongado de corriente.	Pulsar la tecla de confirmación. Se muestra la temperatura más caliente.  Pulsar la tecla de confirmación. La temperatura actual parpadea y la indicación cambia con el símbolo de alarma de temperatura hasta alcanzar la temperatura ajustada. Comprobar la calidad del producto refrigerado.


# Uso

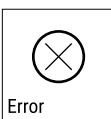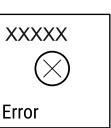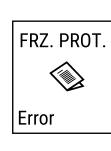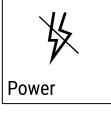Mensaje	Causa	Solución
 Error	El aparato está defectuoso o el aparato o alguno de sus componentes tiene algún error.	<p>Trasladar el producto refrigerado.</p> <p>Pulsar la tecla de confirmación. Se mostrará el código del error.</p>  
		<p>Pulsar la tecla de confirmación. Aparece otro código de error, si lo hay.</p> <p>•</p> <p>Aparece la pantalla de estado con el símbolo de error parpadeante.</p> <p>Al pulsar las teclas de navegación, vuelve(n) a aparecer el/los código(s) de error.</p> <p>Apuntar el/los código(s) de error y contactar con el servicio de atención al cliente.</p>  
	El mensaje indica que el modo de protección anticongelante está activo (por ejemplo, debido a la apertura frecuente de la puerta o a la carga de artículos).	<p>Pulsar la tecla de confirmación. <b>FRZ.PROT.</b> visualizado.</p>   <p>Pulsar la tecla de confirmación. Aparece la pantalla de estado con el símbolo de error parpadeante</p>   <p>Al pulsar las teclas de navegación, vuelve a aparecer el código de error.</p> <p>Al cabo de unas cuantas horas, el aparato cambia automáticamente al modo de servicio normal y el mensaje desaparece. Si el mensaje sigue apareciendo, pero las causas no son ciertas, contacte con el servicio de atención al cliente. (consulte 9.3 Servicio al cliente)</p>
 Corte de corriente	El mensaje aparece después de una interrupción del suministro eléctrico, cuando la temperatura está por encima del límite de alarma al volver la corriente.	<p>Pulsar la tecla de confirmación. Se muestra la temperatura más caliente.</p>  <p>Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se detiene y se muestra la temperatura actual.</p> <p>Comprobar la calidad del producto refrigerado.</p> 
 Error de WLAN	Conexión WLAN interrumpida.	<p>Comprobar la conexión.</p> <p>Pulsar la tecla de confirmación.</p> <p>La alarma se desactiva.</p> 
 Error WWW WLAN	El mensaje aparece cuando no hay conexión a internet a través de wifi.	<p>Comprobar la conexión.</p> <p>Pulsar la tecla de confirmación.</p> <p>La alarma se desactiva.</p> 

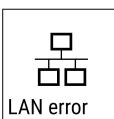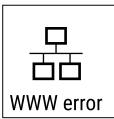Mensaje	Causa	Solución
 LAN error	Conexión LAN interrumpida.	Comprobar la conexión y el cable de red. Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se desactiva. 
 Error WWW LAN	El mensaje aparece cuando no hay conexión a internet a través de la red de área local.	Comprobar la conexión. Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se desactiva. 

### 6.3.2 Recordatorios

Los recordatorios aparecen cuando se solicita que se efectúe alguna acción. Los recordatorios se indican de forma audible con una señal acústica y visualmente mediante un símbolo en la pantalla. El mensaje se confirma pulsando el botón de confirmación.

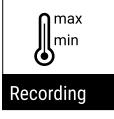Mensaje	Causa	Solución
 Maintenance	Este mensaje aparece cuando finaliza el temporizador del intervalo de mantenimiento ajustado.	 Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se desactiva. <b>Nota</b> El intervalo de mantenimiento se puede ajustar (consulte 6.2.8 Recordatorio de intervalo de mantenimiento).
 Recording	Este mensaje aparece cuando la memoria del registro de temperatura (999 horas) está llena.	 Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se desactiva. Los datos más antiguos se sobrescriben. <b>Nota</b> El registro de temperatura se puede restablecer (consulte 6.2.4 Registro de temperatura).

## 7 Equipamiento

### 7.1 Cierre de seguridad

El cierre de la puerta del electrodoméstico está provisto de un mecanismo de seguridad.

#### 7.1.1 Bloqueo del electrodoméstico

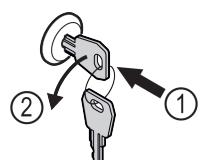


Fig. 170 Representación a modo de ejemplo

- Introducir la llave Fig. 171 (1).
- Girar la llave 90° en sentido antihorario Fig. 171 (2).
- El electrodoméstico ha quedado bloqueado.

#### 7.1.2 Desbloqueo del electrodoméstico

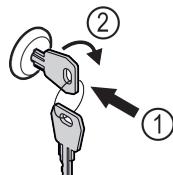


Fig. 171 Representación a modo de ejemplo

- Introducir la llave Fig. 171 (1).
- Girar la llave 90° en sentido horario Fig. 171 (2).
- El electrodoméstico se ha desbloqueado.

### 7.2 Sensores

El electrodoméstico se puede equipar con los siguientes sensores para vigilar la temperatura:

- Sensor del termostato de seguridad
- Sensor C

# Mantenimiento

## 7.2.1 Sensor del termostato de seguridad

El sensor del termostato de seguridad vigila el descenso de la temperatura y, con ello, protege frente a temperaturas demasiado bajas (Freeze Protect). Si la temperatura desciende por debajo del valor umbral, el electrodoméstico regula automáticamente el electrodoméstico. Aparece el mensaje de error FRZ. PROT (Freeze Protect) (consulte 6.3 Mensajes).

### Nota

No cubrir el sensor del termostato de seguridad.

## 7.2.2 Sensor C (sensor de control)

El sensor C está montado de forma fija y regula la temperatura en el interior del electrodoméstico. El sensor C se puede calibrar cuando sea necesario. (consulte 6.2.20 Calibración del sensor )

## 7.3 Interfaces

En la parte trasera del electrodoméstico se dispone de varias posibilidades de conexión.

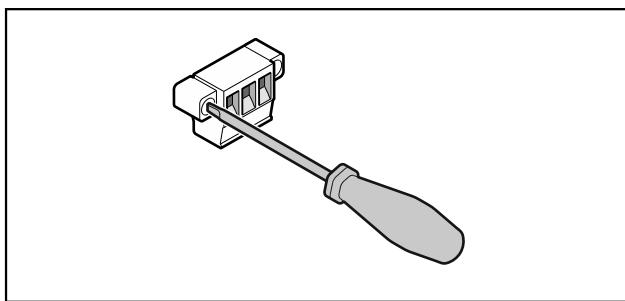


Fig. 172

### Nota

Los conectores están asegurados con tornillos. Para poder retirar los conectores, soltar los tornillos a derecha e izquierda.

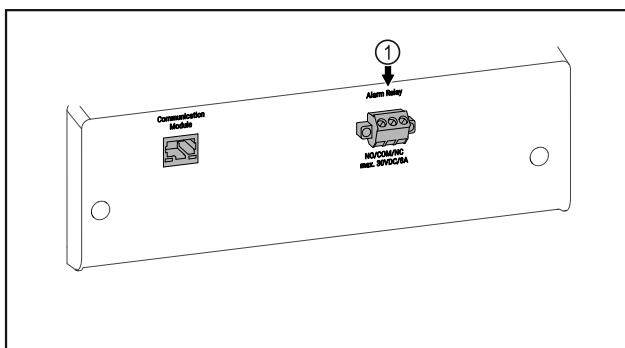


Fig. 173

- (1) Salida de alarma exenta de potencial

## 7.3.1 Salida de alarma exenta de potencial



### ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones por descarga eléctrica!

- ¡La conexión del electrodoméstico a un dispositivo externo de alarma únicamente la puede realizar personal técnico con la debida formación!

Estos tres contactos se pueden utilizar para conectar un dispositivo de alarma óptico o acústico. La conexión está concebida para un máximo de **30 V (DC) - 8 A** a partir de una fuente de bajo voltaje de seguridad SELV (**corriente mínima 150 mA**).

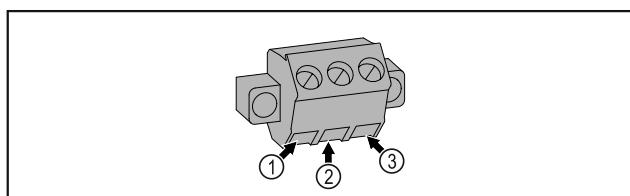


Fig. 174

- (1) NO (normally open)  
Conexión para piloto de control que está activo en el modo de funcionamiento normal o con el electrodoméstico apagado.
- (2) COM (common) Fuente externa de tensión

- (3) NC (normally closed)  
Conexión para piloto de alarma o emisor de alarma acústica que está activo en caso de alarma o ausencia de alimentación de tensión.

## 8 Mantenimiento

### 8.1 Plan de mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento se han de llevar a cabo periódicamente para preservar el funcionamiento del electrodoméstico.



### ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones y desperfectos por trabajos de mantenimiento no profesionales!

Daños personales y materiales.

- Los trabajos de mantenimiento únicamente los puede llevar a cabo personal técnico con la debida formación.



### ADVERTENCIA

¡Peligro de cortocircuito a través de piezas conductoras de corriente eléctrica!

Electrocución o desperfectos en el sistema electrónico.

- **Apagar el electrodoméstico.**

- Desenchufar el enchufe de alimentación de red o desconectar el fusible.

### Nota

Se puede activar una función de recordatorio para el mantenimiento. (consulte 6.2.8 Recordatorio de intervalo de mantenimiento )

### Nota

Se recomienda crear un protocolo de mantenimiento en el que se documentan todos los trabajos realizados (reparaciones, inspecciones).

### Nota

Liebherr recomienda un mantenimiento anual. Para obtener una oferta individual, diríjase al servicio al cliente (consulte 9.3 Servicio al cliente) .

Componente	Actividad	Intervalo de mantenimiento
Piezas de chapa	Comprobar en cuanto a desperfectos y corrosión. Cambio de piezas dañadas: (consulte 9.3 Servicio al cliente)	Anual
Puerta, bisagras	Comprobar en cuanto a alineación (consulte 4.14 Alineación de la puerta), suavidad de marcha y asiento firme.	Anual
Cierre, tirador de la puerta*	Comprobar en cuanto a suavidad de marcha y asiento firme.	Anual
Junta de la puerta	Comprobar en cuanto a desperfectos, desgaste y asiento firme. Se puede adquirir una junta de la puerta de recambio a través del servicio al cliente (consulte 9.3 Servicio al cliente).	Anual
Sensor	Calibrar el sensor. (consulte 6.2.20 Calibración del sensor )	Anual
Pasante del sensor	Comprobar el material sellante en cuanto a daños.	Anual
Superficies	Limpiar (consulte 8.3 Limpiar el aparato)	Recomendación: una vez al mes o según sea necesario o conforme a las especificaciones en el lugar de instalación
Superficies	Desinfectar Liebherr ha probado los siguientes desinfectantes: Dismozon pur 1 % Lösung (Bode Chemie), Suma Quicksan (Diversey), Incidin Extra N (Ecolab Healthcare), Acrylan (Antiseptica chem.-pharm. Produkte), Buraton 10 F (Schülke und Mayr), Frankocid N (Franken Chemie), Apesin DSR 50 (Tana), Nüscosept Spray (Dr. Nüsken), Melsept SF (B. Braun Melsungen), Kohrsolin (Bode Chemie), Neoquat S (Dr. Weigert), Indicin Rapid (Ecolab Healthcare), Bacillocid Spezial (Bode Chemie), Neoform K Spray (Dr. Weigert), Apesin Desinf. Spray (Tana), Nüscosept 100 (Dr. Nüsken), Antisept T (Fink Tec), Apesin AP 100 0,50% Lösung (Tana), Perform Pulver 2% Lösung (Schülke und Mayr) Respetar las instrucciones de uso del fabricante correspondiente. Si se utilizan otros desinfectantes diferentes, probarlos previamente en una zona que no salte a la vista.	Recomendación: una vez al mes o según sea necesario o conforme a las especificaciones en el lugar de instalación
Lugar de instalación, electrodoméstico	Descontaminar El electrodoméstico es apto para ser descontaminado con peróxido de hidrógeno H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> . No se deben superar los valores de la siguiente especificación de aplicación: Concentración máxima 250 ppm. Humedad máxima 85 %. Temperatura ambiente máxima permitida conforme a la clase climática. (consulte 2.4 Ámbito de uso del electrodoméstico)	Recomendación: según sea necesario o según las especificaciones en el lugar de instalación, máximo 2 veces al año
Ranura de aire del ventilador	Limpiar (consulte 8.3.3 Limpieza de la cubierta del ventilador)	Anual
Reenvío de alarma		
Cable de red	Comprobar en cuanto a desperfectos.	Anual o bien al cambiar de ubicación
Ángulo de vuelco	Comprobar en cuanto a capacidad de funcionamiento y asiento firme.	Anual o bien al cambiar de ubicación

# Mantenimiento

Componente	Actividad	Intervalo de mantenimiento
Patas de ajuste/ruedas	Comprobar en cuanto a capacidad de funcionamiento, desperfectos y asiento firme. Cambiar las piezas dañadas. (consulte 9.3 Servicio al cliente)	Anual

## 8.2 Descongelación del electrodoméstico



### ADVERTENCIA

¡Desescarche incorrecto del aparato!  
Lesiones y daños.

- Para acelerar el proceso de descongelación, no se deben usar otros dispositivos mecánicos ni medios distintos a los recomendados por el fabricante.
- No utilice ningún aparato de limpieza al vapor o con calor, llamas libres ni 'sprays' de desescarche.
- No retire el hielo con objetos punzantes.

La descongelación se realiza automáticamente. El agua de descongelación sale por el orificio de vaciado y se evapora.

Para mantener la funcionalidad del electrodoméstico, recomendamos descongelar cuando haya una acumulación de hielo elevada. La ubicación de montaje (por ejemplo, alta humedad), la configuración del dispositivo y el comportamiento incorrecto del usuario son decisivos para la formación de escarcha en el interior.

Si el ciclo de descongelación automática no es suficiente:

- Iniciar manualmente la descongelación automática. (consulte 6.2.19 Descongelación )

Si el problema persiste, descongelar el aparato manualmente:

- Apagar el electrodoméstico. (consulte 6.2.2 Encendido y apagado del electrodoméstico )
- Retirar el enchufe de alimentación de red.
- Cambiar a otra ubicación los productos refrigerados.
- Dejar abierta la puerta del electrodoméstico durante la descongelación.
- Recoger el agua de descongelación restante con un paño, limpiar el orificio de vaciado y el electrodoméstico.

## 8.3 Limpiar el aparato

### 8.3.1 Preparativos



### ADVERTENCIA

¡Peligro de cortocircuito a través de piezas conductoras de corriente eléctrica!

Electrocución o desperfectos en el sistema electrónico.

#### ► Apagar el electrodoméstico.

- Desenchufar el enchufe de alimentación de red o desconectar el fusible.



### ADVERTENCIA

Peligro de incendio

- No dañar el circuito de refrigeración.

- Vaciar el electrodoméstico.
- Retirar el enchufe de alimentación de red.
- Observar las indicaciones para el transporte del aparato. (consulte 4.3 Transporte del electrodoméstico)

### 8.3.2 Limpieza de la carcasa

#### AVISO

¡Limpieza indebida!

Daños en el aparato.

- Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpia-dores universales con pH neutro.
- No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arranazos.
- No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.



### ADVERTENCIA

Riesgo de daños y lesiones derivado del vapor caliente  
El vapor caliente puede causar quemaduras y dañar las superficies.

- No emplee nunca aparatos de limpieza a vapor

#### AVISO

¡Peligro de daños por cortocircuito!

- Al limpiar el electrodoméstico, asegurarse de que no penetre agua de limpieza en los componentes eléctricos.

- Limpiar el electrodoméstico con un paño suave y limpio. En caso de suciedad persistente, utilizar agua tibia con un limpiaador neutro. Las botellas de vidrio se pueden limpiar adicionalmente con limpia cristales.
- Limpiar una vez al año la espiral del condensador. Si la espiral del condensador no se limpia, se reduce considerablemente la eficiencia del electrodoméstico.

### 8.3.3 Limpieza de la cubierta del ventilador

#### AVISO

¡Peligro de daños por cortocircuito!

- Al limpiar el electrodoméstico, asegurarse de que no penetre agua de limpieza en los componentes eléctricos.

#### AVISO

¡Limpieza indebida!

Daños en el aparato.

- Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpia-dores universales con pH neutro.
- No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arranazos.
- No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.

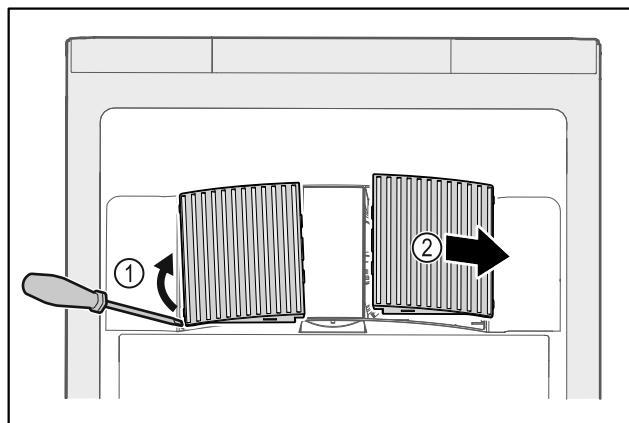


Fig. 175

- ▶ Abrir cuidadosamente las cubiertas del ventilador haciendo palanca por un lado Fig. 175 (1) y retirarlas hacia delante Fig. 175 (2).
- ▶ Enjuagar las ranuras de aire de las cubiertas del ventilador bajo el chorro de agua corriente. En caso de suciedad persistente, utilizar agua tibia con un limpiador neutro.
- ▶ Dejar secar completamente las cubiertas del ventilador al aire.
- ▶ Volver a colocar las cubiertas del ventilador en el electrodoméstico.

## 8.3.4 Limpieza del interior



### ADVERTENCIA

¡Peligro de cortocircuito a través de piezas conductoras de corriente eléctrica!

Electrocución o desperfectos en el sistema electrónico.

- ▶ Apagar el electrodoméstico.

- ▶ Desenchufar el enchufe de alimentación de red o desconectar el fusible.



### ADVERTENCIA

Riesgo de daños y lesiones derivado del vapor caliente  
El vapor caliente puede causar quemaduras y dañar las superficies.

- ▶ No emplee nunca aparatos de limpieza a vapor

### AVISO

¡Limpieza indebida!

Daños en el aparato.

- ▶ Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpia-dores universales con pH neutro.
- ▶ No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
- ▶ No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.

### Nota

- ▶ Sumidero del agua de descongelación (consulte 2.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento) : eliminar los sedimentos con una herramienta auxiliar fina (p. ej., un bastoncillo de algodón).

### Nota

No dañar ni retirar la placa de características situada en el interior del electrodoméstico. La placa de características es importante para el servicio al cliente. (consulte 9.3 Servicio al cliente)

- ▶ Abrir la puerta.
- ▶ Vaciar el electrodoméstico.

- ▶ Limpiar el interior y las piezas del equipamiento con agua tibia y un poco de detergente. No utilizar productos de limpieza cáusticos ni que contengan arena y tampoco disolventes químicos.

## 8.3.5 Despues de la limpieza

- ▶ Secar el electrodoméstico y las piezas del equipamiento.
- ▶ Conectar y poner en marcha el electrodoméstico.
- ▶ Cuando la temperatura sea lo suficientemente baja:
- ▶ colocar los productos que se deban refrigerar.
- ▶ Repetir periódicamente la limpieza.
- ▶ Limpiar y eliminar el polvo de la máquina de refrigeración con intercambiador de calor una vez al año.

# 9 Asistencia al cliente

## 9.1 Datos técnicos

Rango de temperatura		
Refrigeración	+3 °C a +16 °C	

Carga máxima por bandeja A)		
Ancho del electrodoméstico	600 mm	750 mm
Estantes parrilla	45 kg	60 kg
Placa de vidrio	40 kg	40 kg
Cajón (refrigeradores)	15 kg	15 kg

A) En caso de carga elevada, las bandejas pueden combarse ligeramente.

Carga total máxima y peso neto		
Modelo (consulte 4.2 Dimensiones del electrodoméstico)	Carga total máxima	Peso neto
SRF.. 3501*	180 kg*	60 kg*
SRF.. 3511*	180 kg*	75 kg*
SRF.. 4001*	225 kg*	65 kg*
SRF.. 4011*	225 kg*	82 kg*
SRF.. 5501*	300 kg*	80 kg*
SRFvg 5511*	300 kg*	96 kg*

Capacidad útil	
Véase la capacidad útil en la placa de características. (consulte 2.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento)	

Iluminación*	
Clase de eficiencia energética A) *	Fuente de luz*
Este producto contiene una o varias fuentes de luz de la clase de eficiencia energética F	LED

A) El electrodoméstico puede incluir fuentes de luz con diferentes clases de eficiencia energética. Se indica la clase de eficiencia energética más baja.

Condiciones de instalación	
Grado de suciedad (entorno del electrodoméstico)	PD2
Temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C

# Asistencia al cliente

Condiciones de instalación	
Humedad ambiental relativa máxima	75 %, no condensante
Altitud operativa máxima (m sobre el nivel del mar)	2000 m 1500 m (puerta de cristal)

Valores eléctricos	
Tensión nominal	220-240 V ~
Frecuencia	50/60 Hz
Valor de conexión	2,0 A
Oscilaciones máximas de red	+/-10 %

Valores eléctricos	
Categoría de sobretensión	II

## 9.2 Avería técnica

El electrodoméstico se ha construido y fabricado para proporcionar un alto nivel de fiabilidad funcional y una larga vida útil. No obstante, si durante el funcionamiento se produce una avería, comprobar si se trata de un fallo de uso. En este caso, los costes de reparación correrán a cargo del usuario aunque el electrodoméstico se encuentre dentro del periodo de garantía.

El usuario puede subsanar las siguientes averías.

### 9.2.1 Funcionamiento del electrodoméstico

Fallo	Causa	Solución
<b>El electrodoméstico no funciona.</b>	→ El electrodoméstico no está encendido.	► Encender el electrodoméstico.
	→ El enchufe de alimentación de red no entra correctamente en la caja de enchufe.	► Comprobar el enchufe de alimentación de red.
	→ El fusible de la caja de enchufe no está en buen estado.	► Comprobar el fusible.
	→ Fallo de corriente	► Mantener el electrodoméstico cerrado. ► Si es necesario, guardar los productos refrigerados/congelados en un frigorífico/congelador independiente si el fallo de corriente se prolonga.
	→ El conector para aparatos de frío no está correctamente insertado en el electrodoméstico.	► Comprobar el conector para aparatos de frío.
<b>La temperatura no es suficientemente baja.</b>	→ La puerta del electrodoméstico no está cerrada correctamente.	► Cerrar la puerta del electrodoméstico.
	→ La ventilación y el escape de aire son insuficientes.	► Liberar y limpiar la rejilla de ventilación.
	→ La temperatura ambiente es demasiado alta.	► Comprobar que las condiciones ambientales sean correctas: (consulte 2.4 Ámbito de uso del electrodoméstico)
	→ El electrodoméstico se ha abierto con demasiada frecuencia o ha permanecido abierto durante mucho tiempo.	► Esperar a ver si se vuelve a ajustar de forma automática la temperatura necesaria. En caso contrario, dirigirse al servicio atención al cliente. (consulte 9.3 Servicio al cliente)
	→ La temperatura está ajustada incorrectamente.	► Ajustar la temperatura más baja y comprobarlo transcurridas 24 horas.
	→ El electrodoméstico está situado demasiado cerca de una fuente de calor (cocina, calefacción, etc.).	► Cambiar el lugar de instalación del electrodoméstico o de la fuente de calor.

## 9.3 Servicio al cliente

En primer lugar, comprobar si puede eliminar el error por su cuenta. Si no fuera posible, ponerse en contacto con el servicio al cliente.

Puede encontrar la dirección en el folleto del "servicio de atención al cliente de Liebherr" adjunto o en [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).

### 9.3.1 Contacto con el servicio al cliente

Asegurar que se dispone de la siguiente información sobre el electrodoméstico:

- Denominación del electrodoméstico (Model e Index)
- N.º de servicio (Service)
- N.º de serie (S-Nr.)
- Acceder a la información sobre el electrodoméstico a través de la pantalla (consulte 6.2.16 Información sobre el electrodoméstico).

-o-

- Obtener la información sobre el electrodoméstico en la placa de características. (consulte 9.4 Placa de características)
- Anotar dicha información.
- Informar al servicio al cliente: Indicar el error y facilitar la información sobre el electrodoméstico.
- Esto permite un servicio rápido y preciso.
- Seguir las instrucciones del servicio al cliente.

## 9.4 Placa de características

La placa de características se encuentra en la parte interior del aparato. Véase la vista general del aparato.

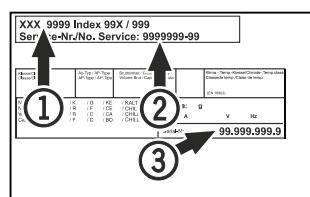


Fig. 176

(1) Denominación del aparato  
(2) N.º de servicio

(3) N.º de serie

## 10 Puesta fuera de servicio

- Vaciar el aparato.
- Apagar el aparato.
- Sacar el enchufe de la toma de corriente.
- Retirar el conector para aparatos de frío si es necesario: Extraer el conector para aparatos de frío del enchufe del aparato y moverlo hacia la izquierda y hacia la derecha al mismo tiempo.
- Limpiar el aparato. (consulte 8.3 Limpiar el aparato)
- Si están presentes: Retire las cubiertas y el aislamiento de la guía del sensor para evitar la formación de moho.
- Dejar la puerta abierta para que no se formen olores desagradables.

### Nota

¡Daños en el aparato y fallos de funcionamiento!

- Tras la puesta fuera de servicio, el aparato se debe almacenar a una temperatura ambiente permitida de entre -10 °C y +50 °C.

## 11 Eliminación

### 11.1 Preparar el aparato para su eliminación



Liebherr utiliza pilas en algunos aparatos. Por motivos de protección del medioambiente, la legislación de la UE obliga al usuario final a retirar estas pilas de los aparatos usados antes de proceder a su eliminación. Si su aparato incluye pilas, encontrará la indicación correspondiente en el propio aparato.

**Bombillas** Si puede retirar usted mismo las bombillas sin dañarlas, también debe desmontarlas antes de la eliminación del aparato.

- Poner el aparato fuera de servicio.
- Si es posible: desmontar las bombillas sin dañarlas.

### 11.2 Eliminar el aparato de manera respetuosa con el medioambiente



El aparato todavía contiene materiales valiosos y se debe llevar a un punto de recogida separado de los residuos domésticos sin clasificar.



Bombillas

Las pilas se deben eliminar por separado del aparato usado. A este respecto, puede entregar las pilas gratuitamente en un comercio, así como en los centros de reciclaje y puntos verdes.

Eliminar las bombillas desmontadas a través de los sistemas de recogida pertinentes.



#### ADVERTENCIA

¡Fugas de refrigerante y aceite!

Incendio. El refrigerante contenido es respetuoso con el medioambiente, pero es inflamable. El aceite contenido también es inflamable. Las fugas de refrigerante y aceite pueden inflamarse con una concentración correspondientemente elevada y al entrar en contacto con una fuente de calor externa.

- No se deben dañar las tuberías del circuito de refrigerante y del compresor.
- Observar las indicaciones para el transporte del electrodoméstico. (consulte 4.3 Transporte del electrodoméstico)
- Transportar el aparato sin daños.
- Eliminar las pilas, las bombillas y el aparato conforme a lo dispuesto anteriormente.

## 12 Información adicional

En el folleto de servicio adjunto o en internet, en <https://home.liebherr.com>, encontrará más información sobre las condiciones de garantía.

## Información adicional

---



En caso de fallo del electrodoméstico, informar:

Identificador del modelo / número de inventario:

## Guía rápida para el uso diario

### Información sobre el uso de esta guía rápida:

- Esta guía rápida no sustituye las instrucciones de uso completas ni un instruccionalamiento directamente en el electrodoméstico.
- Esta guía rápida supone una ayuda para el uso y manejo diarios del electrodoméstico.
- Lea íntegramente las instrucciones de uso y las indicaciones de seguridad contenidas.

Esta guía rápida es válida para: SRFvg 35../40../55..



Las instrucciones de uso completas se pueden descargar con el código QR:



### Uso previsto

Este frigorífico para laboratorio es apto para el almacenamiento profesional de productos a temperaturas entre 3 °C y 16 °C.

### Uso incorrecto previsible

No utilizar el electrodoméstico para las siguientes aplicaciones:

- Conservación y refrigeración de:
  - Sustancias químicamente inestables, inflamables o corrosivas
  - Sangre, plasma o demás fluidos del cuerpo humano para realizar transfusiones o para ser utilizados o introducidos en el cuerpo humano
- Empleo en atmósferas potencialmente explosivas
- Empleo al aire libre o en zonas húmedas o donde se producen salpicaduras de agua

### Tener en cuenta lo siguiente a la hora de almacenar los productos:

- Colocar los estantes de rejilla a la altura requerida.
- Tener en cuenta la carga máxima.
- Una vez alcanzada la temperatura de almacenamiento, llenar el electrodoméstico (conservar la cadena de frío).
- No obstruir la ranura de ventilación del ventilador de recirculación de aire en el interior.
- Los productos refrigerados no deben tocar el condensador de la pared trasera.
- Guardar los líquidos en recipientes cerrados.
- Distanciar los productos refrigerados para que el aire pueda circular bien.

## Indicación de estado



Fig. 177 Indicación de estado con temperatura real

## Visualización del registro de temperatura

El registro de temperatura indica el periodo de registro y las temperaturas mínimas y máximas medidas en este tiempo.



Fig. 178

## Restablecimiento del registro de temperatura

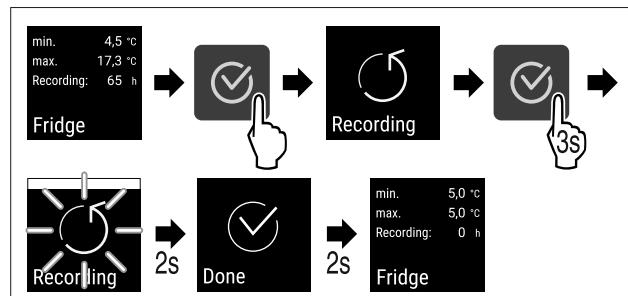


Fig. 179

## Desbloqueo del electrodoméstico

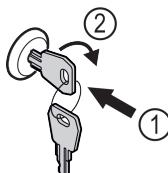


Fig. 180

- Introducir la llave. Fig. 180 (1)
- Girar la llave 90° en sentido horario. Fig. 180 (2)
- El electrodoméstico se ha desbloqueado.

## Bloqueo del electrodoméstico

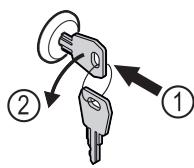


Fig. 181

- Introducir la llave. Fig. 181 (1)
- Girar la llave 90° en sentido antihorario. Fig. 181 (2)
- El electrodoméstico ha quedado bloqueado.

## Limpieza del electrodoméstico

- Vaciar el electrodoméstico.
- Retirar el enchufe de alimentación de red.
- Seguir las indicaciones del manual de uso.
- Tras la limpieza, secar totalmente el electrodoméstico y su equipamiento.
- Conectar el electrodoméstico.
- Encender el electrodoméstico.

# Guía rápida para el uso diario

- Una vez alcanzada la temperatura de almacenamiento, llenar el electrodoméstico.



## ¿Qué hacer en caso de avería?

En caso de avería aparece un mensaje en la pantalla del electrodoméstico. Los mensajes tienen diferentes significados:

Color del símbolo de la pantalla	Significado	Solución
<b>BLANCO con barra negra</b>	<b>Recordatorio</b> Recuerda los procesos generales. Puede ejecutar estos procesos y de este modo solucionar el mensaje.	Volver a leer en las instrucciones de uso los pasos para solucionar el problema y realizarlos.
<b>BLANCO</b>	<b>Advertencia</b> Aparece en caso de averías. Las averías sencillas las puede solucionar uno mismo.	Volver a leer en las instrucciones de uso los pasos para solucionar el problema y realizarlos.
Si usted no puede solucionar el problema por sí mismo, diríjase al empleado responsable o al centro de atención al cliente más cercano.		



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**ES** MANUAL ORIGINAL DEL CONDUCTOR

Fecha de publicación: 20250805

**Índice de números  
de artículo: 7080728-00**

