

SCFvh 4032

Labor-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost

Perfection




Freestanding

LIEBHERR

SCFvh 4032

Labor-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost
Perfection

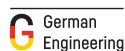

Ultra
Efficient

No
Frost



Zubehör

711330800

Tragrost kunststoffbeschichtet, weiß

Brutto- / Nettorauminhalt

Kühlteil 284/206 l

Gefrierteil 112/58 l

Außenmaße in mm (B/T/H) 597/654/2044

Innenmaße in mm (B/T/H)

Kühlteil 460/423/1037

Gefrierteil 406/292/595

Energieverbrauch in 365 Tagen 459 kWh¹

Umgebungstemperatur +10 °C bis +35 °C

Wärmeabgabe 380

Kältemittel R 600a

Geräusch-Schallleistung 48 dB(A)

Frequenz / Spannung 50/60 Hz / 220-240 V~

Kühlsystem dynamisch

Abtauverfahren automatisch

Temperaturbereich

Kühlteil +3 °C bis +16 °C

Gefrierteil -9 °C bis -30 °C

Gehäusematerial/Farbe Stahl/weiß

Türmaterial / Farbe Isolierglastür / Stahl / weiß

Material Innenbehälter Kunststoff weiß

Art der Steuerung 2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe

Alarm bei Störung optisch und akustisch

Netzausfallalarm unmittelbar bei Netzunterbrechung für mind. 12 h

Potentialfreier Kontakt Ja

Art der Vernetzbarkeit SmartModule

Vernetzungslösung Integriert, entnehmbar

Schnittstelle WLAN/LAN

Datenlogger integriert, USB-Schnittstelle

Innenbeleuchtung LED, separat schaltbar

Verstellbare Ablageflächen 4

Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm 460 / 423

Belastbarkeit Ablageflächen 45 kg

Maximale Gesamtbelastung 345 kg

Schubfächer 3

Griff Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik

Fühlerdurchführung 2 x Ø 10

DIN 13277 Ja

Art des Schlosses mechanisch

Türanschlag rechts wechselbar

Brutto-/Nettogewicht 103/98 kg


EAN-Nr. 9005382247716

Reinraumklasse nach ISO EN 14664-1 ISOKlasse 5

GMP Reinraumklasse GMPKlasse B

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Zubehöre dar.
Alle weiteren Zubehöre des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter
home.liebherr.com

Features

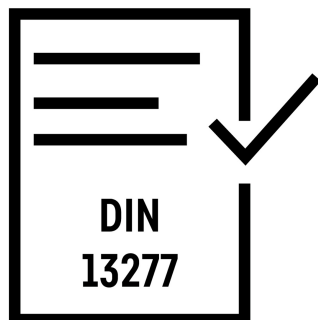

DIN 13277-konform

Labor- und Apothekenkühlschränke von Liebherr erfüllen alle notwendigen Eigenschaften und Leistungskriterien, um der DIN 13277 vollumfänglich zu entsprechen. Die DIN 13277 beschreibt dabei die Anforderungen und Prüfvorgaben für Kühl- und Gefriergeräte im Laboreinsatz sowie zur Lagerung von Arzneimitteln.



+2 °C SafetyDevice

Sinkt im Störfall bei einer Temperatureinstellung von +5 °C oder wärmer die Temperatur unter +2 °C, übernimmt das SafetyDevice die Kontrolle. Es stabilisiert die Temperatur, aktiviert den Alarm und schützt den Inhalt vor dem Einfrieren. Bei kälteren Einstellungen sinkt diese Aktivierungsschwelle relativ mit der Temperatureinstellung.



Ultra-efficient

Stetig steigende Strompreise erfordern energieeffiziente Kühl- und Gefriergeräte. Liebherr schöpft das Einsparpotenzial aller Komponenten voll aus: vom Kompressor über die Dichtung bis hin zur Beleuchtung und Elektronik. Wie positiv sich das auf Ihre Gesamtbetriebskostenrechnung auswirkt, zeigen allen voran die ultra-effizienten Geräte der Perfection-Serie.



NoFrost-Technologie

Mit professionellen Laborgeräten von Liebherr ist kein Abtauen mehr nötig. Auftretende Feuchtigkeit wird durch die Umluftkühlung gebunden, bedarfsgesteuerte Abtauphasen vertreiben selbst letzte Feuchtigkeitspartikel aus dem Innenraum - für eine komfortable, sichere und eisfreie Lagerung.



Mechanisches Schloss


Alle professionellen Liebherr-Geräte der Performance Serie sind zur Lagerung temperatursensibler Produkte mit einem mechanischen Schloss mit zwei Schlüsseln ausgestattet. So können Sie sicher sein, dass keine unbefugten Hände Zugriff auf Ihr eingelagertes Gut erhalten.



Reinigungsfreundlicher Innenraum

Der Kunststoff-Innenbehälter besteht aus Polyesterol, einem vollständig recycelbaren, robusten und geruchsneutralem Kunststoff. Fugenlos aus einem Stück gefertigt hat er keine versteckten Schmutzfänger und lässt sich in großen Radien schnell und einfach reinigen. Die perfekte Kombination aus Nachhaltigkeit und Hygiene.

Technische Zeichnung

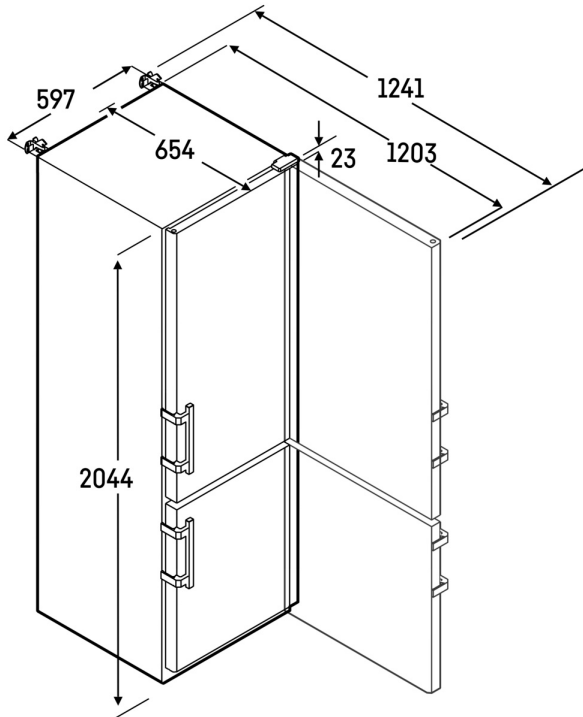

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (11.07.2025)

