

SRUvg 1011

Laborkühlgerät mit Umluftkühlung
Performance



Freestanding

LIEBHERR

SRUvg 1011

Laborkühlgerät mit Umluftkühlung
Performance



↑
82-88
↓



| | |
|--|---|
| Brutto- / Nettorauminhalt | 123/81 l |
| Nischenmaße in mm (B/T/H) | 600/580/820-880 |
| Innenmaße in mm (B/T/H) | 450/467/482 |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 182 kWh ¹ |
| Umgebungstemperatur | +10 °C bis +30 °C |
| Wärmeabgabe | 150 |
| Kältemittel | R 600a |
| Geräusch-Schallleistung | 39 dB(A) |
| Frequenz / Spannung | 50/60 Hz / 220-240 V~ |
| Kühlsystem | dynamisch |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Temperaturbereich | +3 °C bis +16 °C |
| Gradient / max. Fluktuation | 2,6 °C ² / 2,2 °C ³ |
| Gehäusematerial/Farbe | Stahl/weiß |
| Türmaterial / Farbe | Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / weiß |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiß |
| Art der Steuerung | Monochrom-Display, Touch-Buttons |
| Alarm bei Störung | optisch und akustisch |
| Netzausfallalarm | bei Netzurückkehr |
| Potentialfreier Kontakt | Ja |
| Art der Vernetzbarkeit | SmartModule |
| Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
| Schnittstelle | WLAN/LAN (optional) |
| Innenbeleuchtung | LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar |
| Verstellbare Ablageflächen | 2 |
| Material Ablageflächen | Roste kunststoffbeschichtet |
| Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm | 450 / 408 |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 45 kg |
| Maximale Gesamtbelastung | 135 kg |
| Griff | Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik |
| Fühlerdurchführung | 1 x Ø 10 |
| Art des Schlosses | mechanisch |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Brutto-/Nettogewicht | 45,3/42,4 kg |
| EAN-Nr. | 9005382255032 |
| Reinraumklasse nach ISO EN 14664-1 | ISOKlasse 6 |
| GMP Reinraumklasse | GMPKlasse B |

Features




15 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

Die Liebherr-Hausgeräte GmbH unterstützt mit einem kundenorientierten Schritt die Lebensdauer Ihrer hochwertigen Geräte: Die Ersatzteilverfügbarkeit wird 15 Jahre nach Produktionsende des jeweiligen Modells ausgeweitet. Dies gilt für alle Funktionsteile und lagerfähigen Teile der Ausstattung. Rückwirkend sichert Liebherr-Hausgeräte diese Serviceleistung bereits für alle Geräte zu, die seit dem 1.1.2021 produziert wurden



Alarm-Test

Nur ein Alarm, der ausgelöst wird, ist ein guter Alarm. Mit dem Alarmtest kann die Funktionsfähigkeit der internen sowie eventuell einer extern angeschlossenen Alarmeinrichtung geprüft werden. Die Kühlung des Geräts wird während des Testlaufs nicht unterbrochen. Und Sie können in Ruhe den Ernstfall simulieren und mit Ihrem Personal proben.

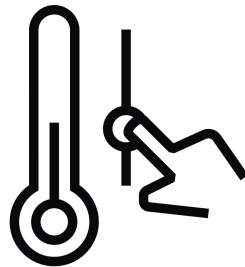

Präzise 1-Punkt-Kalibrierung

Für eine äußerst präzise Temperaturregelung verfügen die Laborgeräte mit elektronischer Steuerung über eine 1-Punkt-Kalibrierung. Diese ermöglicht eine Kompensation zwischen eingestellter und tatsächlicher Innenraumtemperatur. Der Abgleichkorrekturwert kann jeweils in 0,1-K-Schritten verändert werden.



Übersichtliche Geräteinformationen

Sollten sofort da sein, wenn man sie braucht: alle Informationen zum Gerät. Deshalb trägt jeder Liebherr seine Serien- und Servicenummer sowie die Modellbezeichnung schnell ablesbar auf dem Display. Nerviges Suchen oder sogar das Freiräumen des Innenraums zum Ablesen ist damit passé.



Alarm-Relais


Bei Alarm wird sofort die zuständige Zentrale informiert. Sie definieren, welche Alarme weitergeleitet werden, wie lange die Weiterleitung aktiv bleibt und ob nach Alarmende eine Erinnerung erfolgt.



Intuitive Menüführung

Komfort per Fingertipp: Lesen Sie den Gerätestatus ab, ohne die Tür zu öffnen – ganz einfach auf dem flächenbündig in die Tür integrierten Bedienpanel. Die Menüführung ist selbsterklärend und kann mit Symbolen und Sprachführung in bis zu 12 unterschiedlichen Sprachen bedient werden. Das Display kann auch mit Handschuhen über drei Touch Buttons oder mit Touch and Swipe gesteuert werden.

Technische Zeichnung

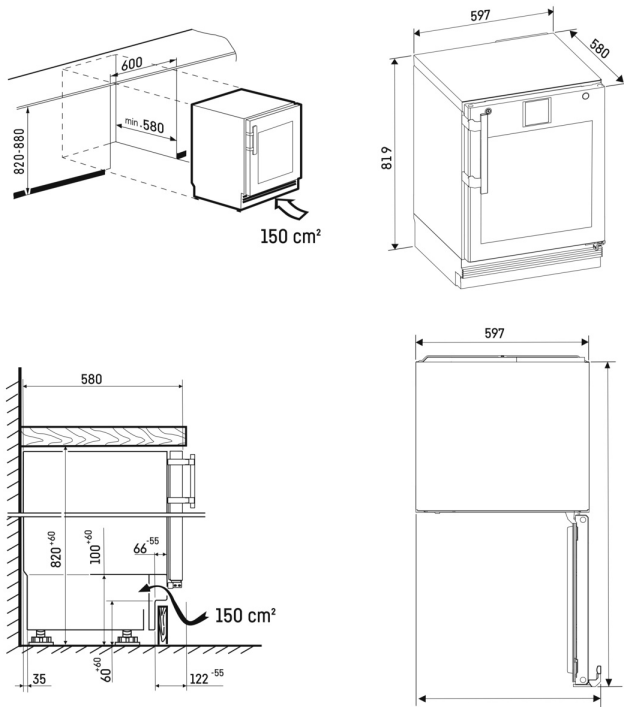

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (27.04.2026)

